



KATALOG PRODUKTÓW ORTODONTYCZNYCH

Trachem Orthodontics to marka oferująca setki produktów z zakresu ortodoncji i stomatologii opracowanych przez ekspertów dla profesjonalistów.

Od 1992 roku mamy przyjemność współpracować nie tylko z uznanymi autorytetami w dziedzinie ortodoncji na całym świecie, ale także z doskonałymi lekarzami-praktykami. Dzięki tym doświadczeniom stworzyliśmy kompleksową ofertę produktów oraz kursów ortodontycznych spełniających oczekiwania lekarzy ortodontów zarówno dopiero zaczynających swoją drogę zawodową w tej dziedzinie jak i wieloletnich praktyków, którzy mieli już okazję przetestować niejedno rozwiązanie.

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 13485:2016



Jako firma REHA FUND będąca właścicielem marki Trachem Orthodontics wierzymy w takie wartości jak:

► Satisfakcja ◀

To zdrowsze, lepsze życie.

► Odpowiedzialność ◀

Dzięki inwestycji w nowe rozwiązania i produkty czujemy się odpowiedzialni za zdrowie tysięcy pacjentów.

► Szacunek ◀

To umiejętność słuchania i rozumienia naszych Klientów.

► Elastyczność ◀

To indywidualne podejście do potrzeb zarówno Lekarzy jak i partnerów biznesowych oraz pracowników.

► Zaufanie ◀

Od ponad 30 lat jesteśmy obecni na rynku produktów ortodontycznych. Zaufały nam setki specjalistów. Wierzymy w długofalowe relacje.



Dołącz do nas, przekonaj się, że współpraca z nami to coś więcej niż tylko biznes.

SPIS TREŚCI

	ZAMKI ORTODONTYCZNE	3
	ŁUKI ORTODONTYCZNE	11
	PIERŚCIEŃ ORTODONTYCZNE	20
	RURKI POLICZKOWE	22
	SPRĘŻYNKI	24
	MASKI I WYCIĄGI	25
	ELASTOMERY	27
	ELEMENTY METALOWE	31
	AKCESORIA ORTODONTYCZNE	35
	RETENCJE RELIANCE	41
	STOJAKI AKRYLOWE	43
	MIKROIMPLANTY PERFECT TITANIUM	44
	NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE	46
	SPOIWA RELIANCE	49

A close-up portrait of a young woman with voluminous, wavy brown hair. She is smiling broadly, showing her teeth which are fitted with clear orthodontic braces. Her hands are raised, with her index fingers pointing towards her cheeks and the braces. She is wearing a white tank top. The background is a solid, soft pink color.


ZAMKI ORTODONTYCZNE

ZAMKI ESTETYCZNE


Zamki szafirowe Brillante 902P-22.../18

Zamki wykonane są z czystego monokryształu, jednego z najtwardszych naturalnie występujących materiałów w przyrodzie. Niski profil zamków oraz gładkie krawędzie haczyków zwiększają komfort pacjenta. Anatomiczne profilowana podstawa zapewnia łatwe naklejanie i odklejanie zamków po leczeniu. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację i zapewniają odpowiednie pozycjonowanie.

NOWE, WYGODNE
OPAKOWANIE

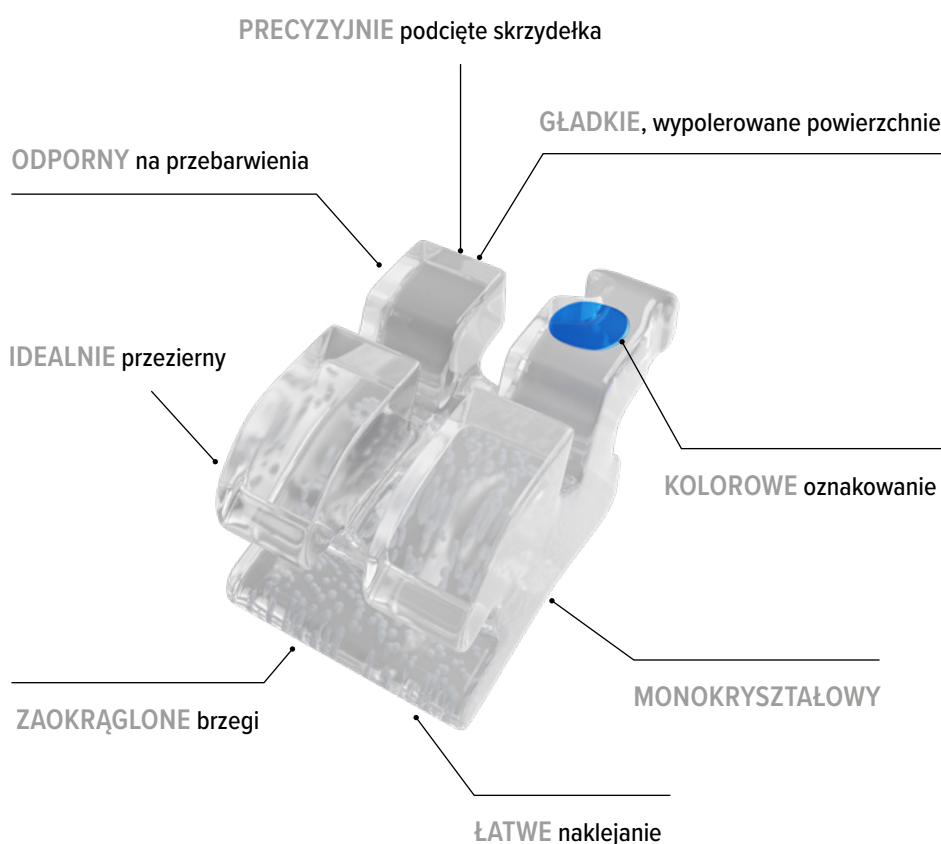

IDEALNIE WYCIĘTY SŁOT
tarcie jak w zamkach metalowych

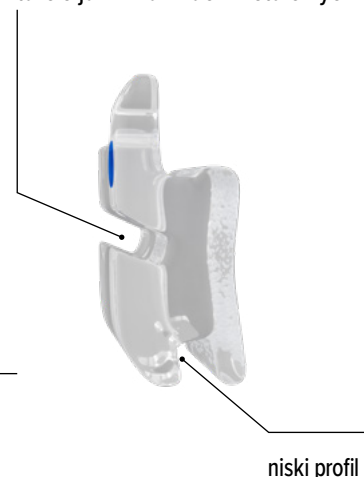

MIKROKRYSTAŁKI w bazie zamka



Slot: .018", .022"

Preskrypcja: Roth, MBT

Haczyki: z haczykami

	1UR / 1UL		2UR / 2UL		3UR / 3UL		4,5UR / 4,5UL		1,2 LL / 1,2LR		3LR / 3LL		4LR / 4LL		5LR / 5LL	
	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip
MBT	17°	4°	10°	8°	0°	8°	-7°	0°	-6°	0°	-6°	3°	-12°	3,5°	-17°	2°
Roth	12°	5°	8°	9°	0°	11°	-7°	0°	0°	0°	-11°	7°	-17°	3,5°	-22°	6,5°

Zamki samoligaturujące Prestige PT V 901VP-22.../18

Zamki zostały zaprojektowane z myślą o stałych, niskich siłach tarcia. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkową wytrzymałość, odporność oraz doskonałe właściwości mechaniczne. Gładka powierzchnia wargowa mechanizmu zamykającego, wyprofilowane, zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzchnie zapewniają zwiększony komfort pacjenta. Zamki dostępne są w 6 preskrypcjach (w tym ceniony system T-Control opracowany przez doktora Daniela Tocolini), co zapewnia szerokie możliwości leczenia różnorodnych przypadków klinicznych.

NOWE, WYGODNE
OPAKOWANIE



ŁATWO OTWIERANA KLAPKA

pozwała na bezproblemową wymianę łuków

PIONOWE WYŻŁOBIENIE

pozwała idealnie wypozycjonować zamek

kontrola rotacji i efektywne
przesuwanie zębów

BARDZIEJ ZAOKRĄGLONY KSZTAŁT
I GŁADKA POWIERZCHNIA
poprawia komfort pacjenta

niskie siły tarcia

OZNAKOWANIE

W PODSTAWIE ZAMKA

pomaga zidentyfikować właściwy ząb

		Szczeka				Żuchwa			
		UR1	UR2	UR3	UR4/5	1/2	3	4	5
MBT	Tip	4°	8°	8°	0°	0°	3°	0°	0°
	Tork	17°	10°	0°	-7°	-6°	-6°	-12°	-17°
ROTH	Tip	5°	9°	11°	0°	0°	5°	0°	0°
	Tork	12°	8°	0°	-7°	-2°	-11°	-17°	-22°
WYSOKI TORK	Tip	4°	8°	8°	0°	0°	3°	0°	0°
	Tork	23°	14°	12°	-8°	-2°	14°	-4°	-17°
ŚREDNI TORK	Tip	4°	8°	8°	0°	0°	3°	0°	0°
	Tork	17°	9°	7°	-8°	-2°	7°	-12°	-17°
NISKI TORK	Tip	4°	8°	8°	0°	0°	3°	0°	0°
	Tork	3°	-4°	-8°	-8°	-10°	0°	-12°	-17°
T-CONTROL	Slot	0.018"	0.018"	0.022"	0.022"	0.018"	0.022"	0.022"	0.022"
	Tip	4°	8°	8°	0°	0°	0°	-3°	0°
	Tork	17°	10°	7°	-7°	-6°	7°	-12°	-17°
	in/out	0.9mm	1.09mm	0.8mm	0.8mm	1.09mm	1.09mm	0.8mm	0.8mm

Narzędzie do otwierania i zamykania zamków zapewnia prostą wymianę łuków. Wystarczy przekręcić o 90 st. dodziąsłowo narzędzie a klapka otwiera się z łatwością. Zmieniając stronę równie łatwo zamkniemy i zabezpieczymy zamek.



Slot: .018", .022"


Preskrypcja: Roth, MBT, Niski Tork, Średni Tork,
Wysoki Tork, T-Control

Haczyki: z haczykami

Zamki samoligaturujące PT 0 901Z

NOWOŚĆ

System pasywnych zamków samoligaturujących został zaprojektowany z niezwykłą precyzją. Dokładnie wykrojony slot pozwala na stałe siły niskiego tarcia. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkową wytrzymałość, odporność oraz doskonałe właściwości mechaniczne a technika najdrobniejszych proszków spiekanych MIM – unikatową precyzję i trwałość zamka. Gładki design, zaokrąglone brzegi i niski profil pozwala na komfort noszenia i sprawia, że zamki są bardzo wygodne i delikatne dla pacjenta. Zamki dostępne są w 3 preskrypcjach, co zapewnia różne możliwości leczenia przypadków klinicznych oraz optymalne ustawianie zębów. A co za tym idzie – osiągnięcie zaplanowanych wcześniej rezultatów.

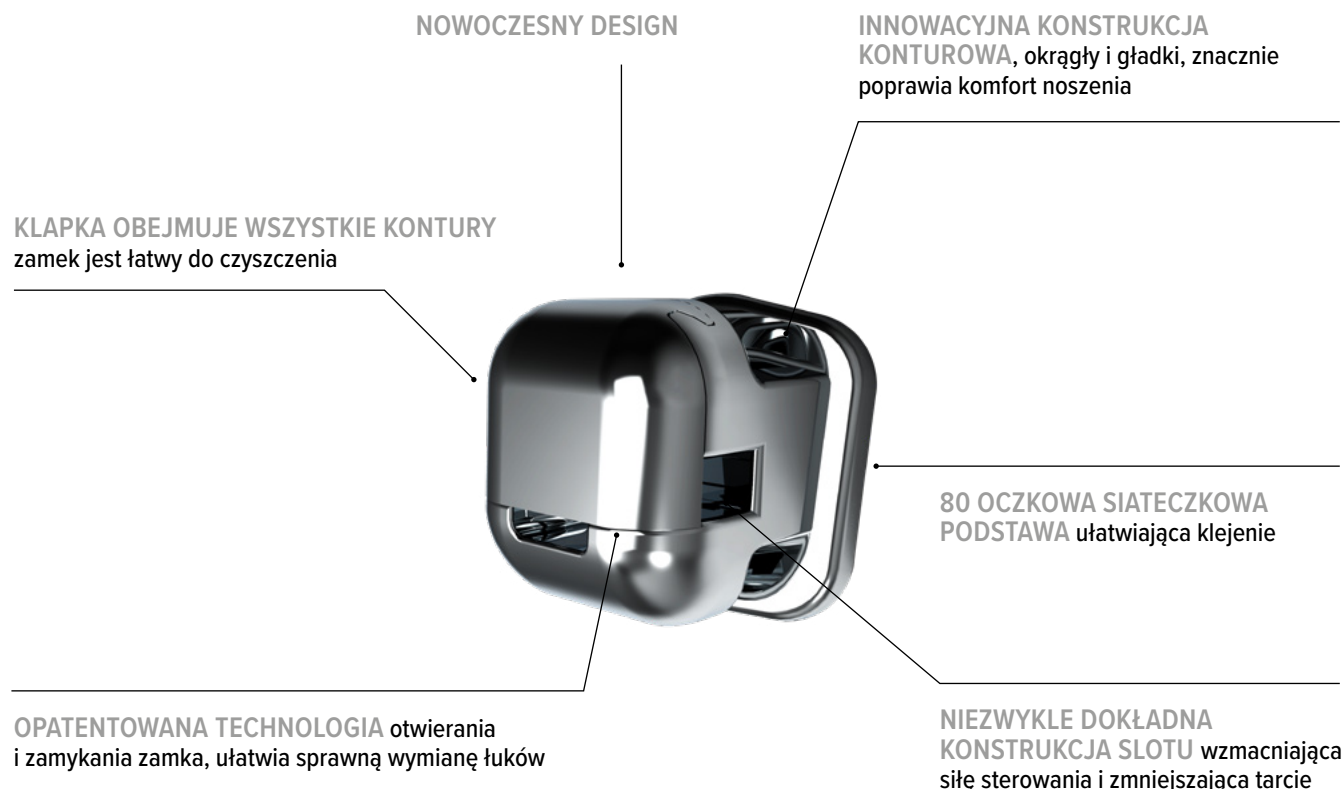

PT ZERO Wysoki tork	Szczęka					Żuchwa				
	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Tip	5°	9°	5°	2°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Tork	22°	13°	11°	-11°	-11°	-3°	-3°	13°	-5°	-17°
in/out (mm)	0,95	1,15	0,9	0,9	0,9	1,15	1,15	0,9	0,9	1

PT ZERO Standardowy tork	Szczęka					Żuchwa				
	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Tip	5°	9°	5°	2°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Tork	12°	8°	7°	-11°	-11°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
in/out (mm)	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	1,15	1,15	0,9	0,9	1

PT ZERO Niski Tork	Szczęka					Żuchwa				
	U1	U2	U3	U4	U5	L1	L2	L3	L4	L5
Tip	5°	9°	5°	2°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Tork	2°	-5°	-9°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-17°
in/out (mm)	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	1,15	1,15	0,9	0,9	1

ZAMKI METALOWE

Zamki metalowe frezowane OPTIMA 907P-22.../18

Zamki frezowane Optima to najwyższa precyzja wykonania i dokładność. System zamków Optima ze stali nierdzewnej integruje wytrzymałość, kontrolę oraz niskie tarcie. Dzięki wzmocnionej twardości stopu zamki nie odkształcają się pod wpływem działających na nie sił, posiadają również większą wytrzymałość slotu w porównaniu do tradycyjnych zamków metalowych. Najniższy z możliwych profili redukuje podrażnienia tkanki miękkiej, chroni błonę śluzową przed uszkodzeniami oraz redukuje zgryzowe interferencje. Mikrowytrawiona, 80-oczkowa siateczka na podstawie zamków zapewnia optymalną siłę wiązania. Gładkie, zaokrąglone powierzchnie gwarantują komfort pacjenta. Meżjalno-dystalne, wyprofilowane brzegi slotu zamka redukują tarcie. Niski, zbalansowany profil z głęboko wciętymi skrzydełkami ułatwia zakładanie ligatur.

NOWE, WYGODNE
OPAKOWANIE



GŁADKIE, ZAOKRĄGLONE
powierzchnie zamka

ZAMKI FREZOWANE
to większa precyzja wykonania

NISKI, ZBALANSOWANY
PROFIL z głęboko wyciętymi
skrzydełkami

NUMER NA PODSTAWIE
ułatwia identyfikację zamka

OPTYMALNA DŁUGOŚĆ
MEŻJALNO-DYSTALNA zapewniająca
znakomitą kontrolę rotacji

MIKROWYTRAWIONA 80-OCZKOWA
SIATECZKA na podstawie

Slot: .018", .022"

Preskrypcja: Roth, MBT

Haczyki: z haczykami

	1UR / 1UL		2UR / 2UL		3UR / 3UL		4,5UR / 4,5UL		1,2 LL / 1,2LR		3LR / 3LL		4LR / 4LL		5LR / 5LL	
	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip
MBT	17°	4°	10°	8°	0°	8°	-7°	0°	-6°	0°	-6°	3°	-12°	0°	-17°	0°
Roth	12°	5°	8°	9°	-2°	11°	-7°	0°	-1°	0°	-11°	5°	-17°	0°	-22°	0°

Zamki Mini-Mim 905P-22.../18

Zamki mini to zwiększenie komfortu, łatwiejsze utrzymanie higieny jamy ustnej oraz przyjemniejszy estetycznie wybór dla pacjenta. Wykonane techniką MIM ze stali nierdzewnej 17-4 tworzą integralną całość z haczykami, co zapewnia łatwe i bezpieczne zaczepianie elastików. Ukośnie wyprofilowane okluzyjne skrzydełka dolnych siekaczy redukują możliwość interferencji siecznych. 80-oczkowa, mikrowytrawiona siateczka na podstawie zamka zapewnia doskonałą siłę klejenia. Odpowiednie ukształtowanie i wyprofilowanie bazy umożliwia precyzyjne dopasowanie do powierzchni korony zęba. Właściwa budowa mezjalno-dystalna oraz zgryzowo-dziąsłowa podstawy zapewnia prawidłowe i sprawne umiejscowienie zamka. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację.

NOWE, WYGODNE OPAKOWANIE




IDEALNIE DOPASOWANE do powierzchni zęba

KOLOROWE oznakowanie

ŁATWE pozycjonowanie


GŁĘBOKO wycięte skrzydełka

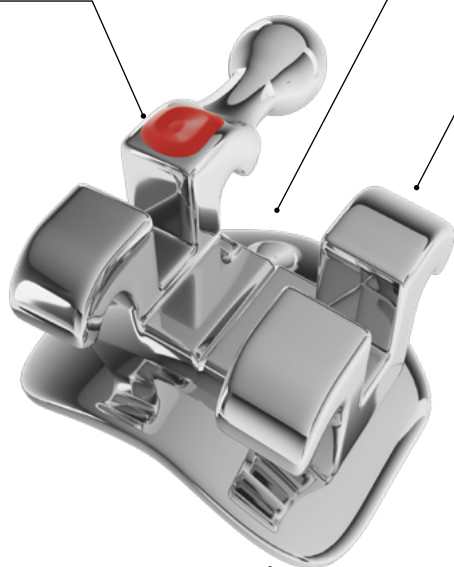

NUMER NA PODSTAWIE ułatwia identyfikację zamka

GŁADKIE, zaokrąglone brzegi

NISKI PROFIL

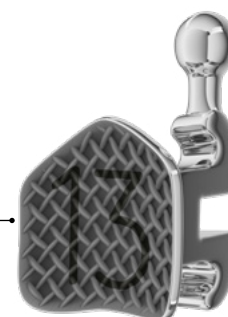

80-OCZKOWA, MIKROWYTRAWIONA, siateczkowa podstawa zwiększa siłę klejenia

Slot: .018", .022"

Preskrypcja: Roth, MBT

Haczyki: z haczykami lub bez haczyków


	1UR / 1UL		2UR / 2UL		3UR / 3UL		4,5UR/4,5UL		1,2 LL / 1,2LR		3LR / 3LL		4LR / 4LL		5LR / 5LL	
	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip
MBT	17°	4°	10°	8°	0°	8°	-7°	0°	-6°	0°	-6°	3°	-12°	0°	-17°	0°
Roth	12°	5°	8°	9°	0°	11°	-7°	0°	-1°	0°	-11°	5°	-17°	0°	-22°	0°

Zamki Uni-Mim Ultra 904U-22.../18

Zamki wykonane są techniką MIM. Mikrowytrawiona podstawa zamka ułatwia przyklejanie oraz zwiększa siłę klejenia. Komponenty pionowe pozwalają na szybkie, dokładne wypozyjonowanie zamka wzdłuż długiej osi korony klinicznej zęba, podczas gdy elementy poziome ustawione są równoległe do brzegu siecznego zęba. Ukośne krawędzie slotu zapewniają łatwość wprowadzania i wyjmowania łuku. Niewielki rozmiar, niski profil oraz zaokrąglone brzegi zwiększają komfort pacjenta. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację. Odpowiednie umieszczenie zamka to dokładniejsze wykończenie przypadku i trwalsze rezultaty.

KOLOROWE oznakowanie

UKOŚNE KRAWĘDZIE SŁOTU ułatwiające wprowadzanie i wyjmowanie łuku

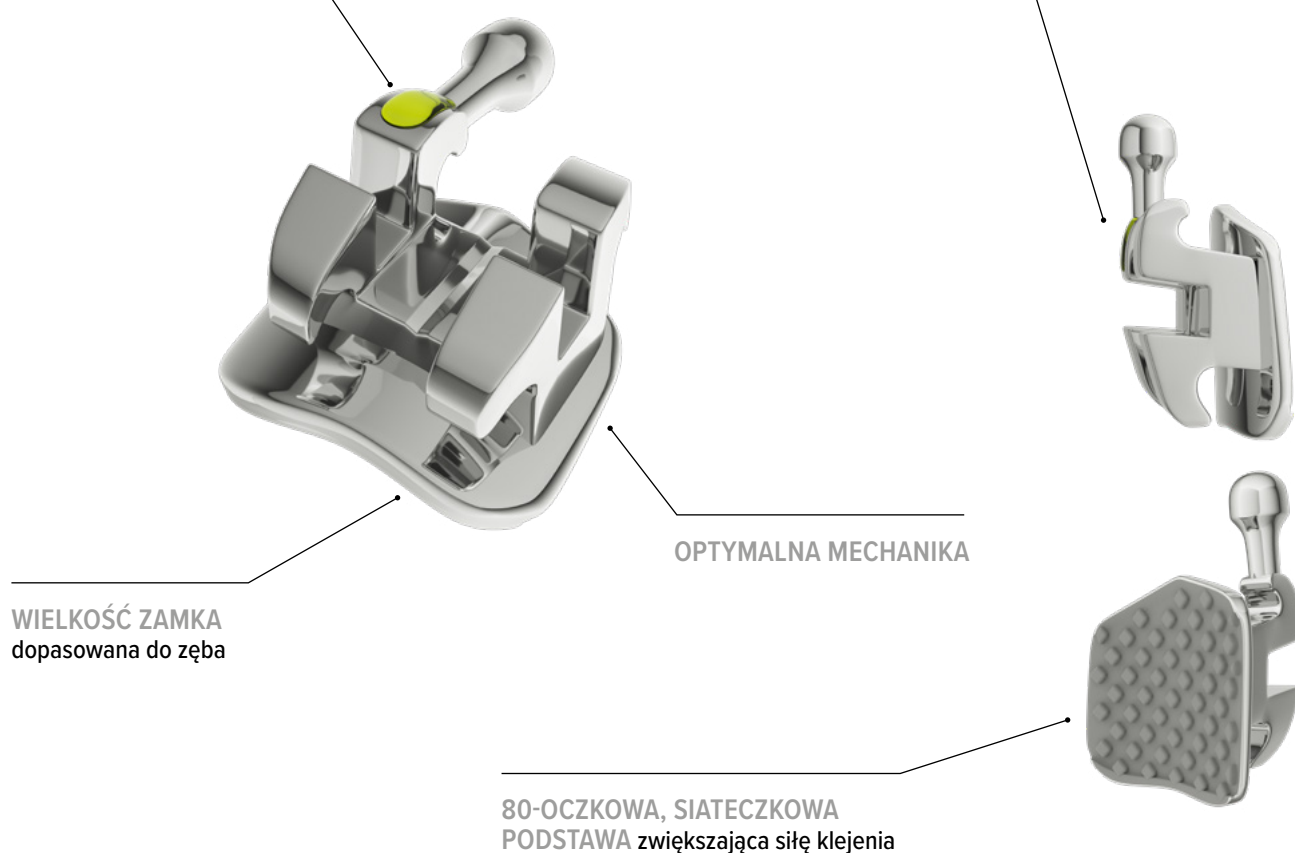

Slot: .018", .022"

Preskrypcja: Roth, MBT

Haczyki: z haczykami lub bez haczyków

	1UR / 1UL		2UR / 2UL		3UR / 3UL		4,5UR/4,5UL		1,2LL/1,2LR		3LR / 3LL		4LR / 4LL		5LR / 5LL	
	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip
MBT	17°	4°	10°	8°	-7°	8°	-7°	0°	-6°	0°	-6°	3°	-12°	2°	-17°	2°
Roth	12°	5°	8°	9°	-2°	10°	-7°	0°	-1°	0°	-11°	7°	-17°	0°	-22°	0°

Zamki stalowe Royal 906-22.../18

Stalowe zamki nowej generacji, wykonane są precyzyjnie zgodnie z najnowszym stanem inżynierii i technologii wytwórczych. Dodatkowo 80-oczkowa siateczka w podstawie zapewnia odpowiednią siłę klejenia. Wykonane są techniką MIM. Posiadają opływowe kształty i dokładnie wykrojone szczegóły. Zaokrąglone brzegi zamków czynią je komfortowymi dla pacjenta. Precyzyjnie podcięte skrzydełka zapewniają łatwe zakładanie ligatur oraz elementów dodatkowych. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację.

KOLOROWE oznakowanie

UKOŚNE KRAWĘDZIE SŁOTU dla łatwego umieszczania i wyjmowania łuku

GŁĘBOKO WYCIĘTE skrzydełka

GŁADKA, ZAOKRĄGLONA powierzchnia

ANATOMICZNIE ukształtowana podstawa

Slot: .018", .022"

Preskrypcja: Roth, MBT

Haczyki: z haczykami lub bez haczyków

	1UR/1UL		2UR/2UL		3UR/3UL		4,5UR/4,5UL		1,2LL/1,2LR		3LR/3LL		4LR/4LL		5LR 5LL	
	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip	tork	tip
MBT	17°	4°	10°	8°	-7°	8°	-7°	0°	-6°	0°	-6°	3°	-12°	2°	-17°	2°
Roth	12°	5°	8°	9°	-2°	10°	-7°	0°	-1°	0°	-11°	7°	-17°	0°	-22°	0°



ŁUKI ORTODONTYCZNE

► Wysoka siła ◀ (Niska elastyczność)

Łuki stalowe

Łuki beta-tytanowe

Łuki niklowo-tytanowe super elastyczne

Łuki miedziano-niklowe

Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termicznie

► Niska siła ◀ (Wysoka elastyczność)

Faza początkowa:

Niwelacja

Wychylenia

Rotacje

Faza pośrednia:

Zamykanie przestrzeni

Indywidualne rotacje

Poziomowanie płaszczyzny zgryzowej


Faza końcowa:

Wymiar pionowy

Indywidualne rotacje

Zaguzkowanie

Retencja

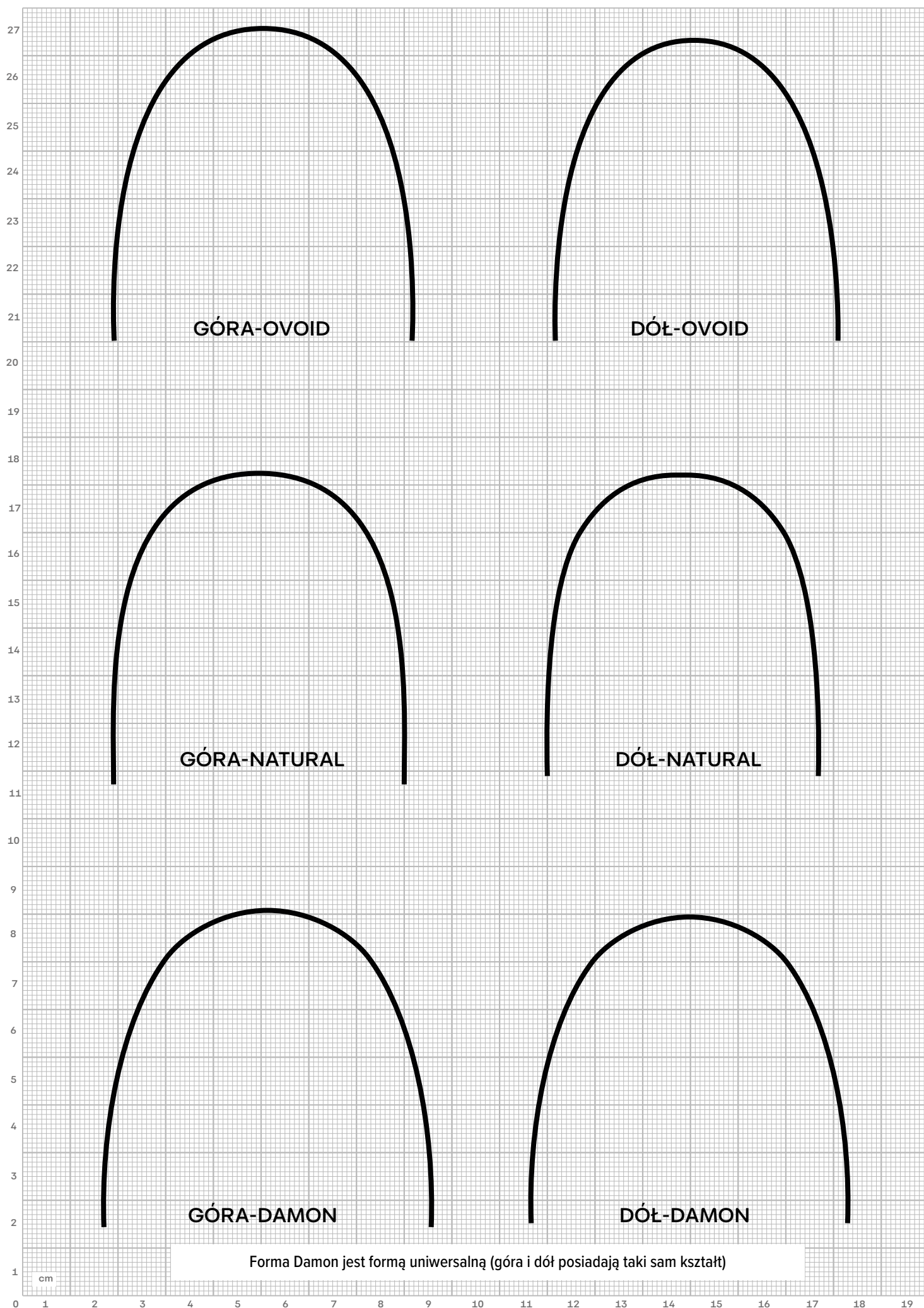

ŁUKI ORTODONTYCZNE

Łuki stalowe (natural) 100-1-..., (ovoid) 101-1-..., (damon) 102-1-...



- duża siła oddziaływania
- odporne na zimno
- zalecane do końcowej fazy leczenia

Łuki wykonane są z medycznej, nierdzewnej stali 304v z myślą do stosowania w technice łuku prostego. Specjalny stop zapewnia maksymalną sprężystość minimalizując jednocześnie pęknięcia. Łuki te można stosować podczas całego procesu leczenia ortodontycznego, jednakże najlepsze rezultaty osiągane są w fazie pośredniej i końcowej. Specjalny stop daje łukom sprężystość, a proces hartowania uczynił je odpornymi na złamanie.

Opakowanie: Natural/Ovoid 1 op. / 10 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

	Natural	Ovoid	Damon
okrągłe	.012, .014, .016, .018, .020	.012, .014, .016, .018, .020	.012, .014, .016, .018
krawężne	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .021/.025	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .021/.025	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025

Łuki niklowo-tytanowe superelastyczne (natural) 100-2-..., (ovoid) 101-2-..., (damon) 102-2-...



- wysoka elastyczność
- umiarkowana siła
- doskonała pamięć kształtu

Opracowanie stopu niklowo-tytanowego i jego dalsze programowanie pozwala wkomponować różnorodne korzystne właściwości w finalny produkt. Superelastyczne łuki pozostają stale aktywne, redukując liczbę koniecznych wymian łuków. Dostarczają ciągłych, przewidywalnych sił podczas całego procesu leczenia ortodontycznego. Odbojność i doskonała pamięć kształtu zapewniają przewidywalne wyniki leczenia bez dokonywania licznych modyfikacji. Łuki podatne są na duże odgięcia bez deformacji oryginalnego kształtu. Ultra gładka powierzchnia łuku zmniejsza tarcie zapewniając łatwe przesuwanie się zębów wzdłuż łuku. Łuk ten jest doskonały w fazie początkowej do poziomowania, wyrównywania i rotacji.

Opakowanie: Natural/Ovoid 1 op. / 10 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

	Natural	Ovoid	Damon
okrągłe	.012, .014, .016, .018, .020	.012, .014, .016, .018, .020	.012, .014, .016, .018
krawężne	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .021/.025	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .021/.025	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025

Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termicznie (natural) 100-3-..., (ovoid) 101-3-..., (damon) 102-3-...



- łatwe ligaturowanie
- lekka – stała siła dla komfortu pacjenta
- niepowtarzalna plastyczność

Łuki osiągają swoje optymalne właściwości w temperaturze 32°C. Unikalne cechy pozwalają na łatwe ligaturowanie w przypadkach ze znacznymi stłoczeniami. Wrażliwe na chłód, pozwalają pacjentowi złagodzić dyskomfort chłodnymi napojami i jedzeniem. Posiadają doskonałą integralność i znakomitą pamięć kształtu. Niska siła zapewnia większy komfort pacjenta i pozwala kontrolować tork już w początkowych fazach leczenia. Łuk pozostaje ciągle aktywny redukując tym samym ilość zmian łuków.

Opakowanie: Natural/Ovoid 1 op. / 10 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

	Natural	Ovoid	Damon
okrągłe	.012, .014, .016, .018, .020	.012, .014, .016, .018, .020	.012, .014, .016, .018
krawężne	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .020/.020, .021/.025	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .021/.025	.016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, .021/.025

Łuki miedziano-niklowe (natural) 100-5-..., (damon) 102-5-...



- precyzja i efektywność
- większa wytrzymałość na deformacje
- kontrola sił

Łuki zostały wyprodukowane z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii dla pełnej kontroli oraz całkowitej przewidywalności efektów leczenia. Dodatek miedzi wzmacnia termalne właściwości łuku zapewniając doskonałą mechanikę dla szerokiego wachlarza przypadków ortodontycznych. Precyzyjna kontrola sił oraz doskonała elastyczność zapewniają szybkie, naturalne i rzetelne rezultaty spełniające wszelkie oczekiwania wymagających pacjentów. Gładka powierzchnia redukuje tarcie. Unikalne właściwości sprężyste zapewniają ciągłą siłę redukując częstotliwość zmian łuków. Łuki aktywowane są w temperaturze jamy ustnej pacjenta dla ułatwienia umieszczania łuku, stałych sił i efektywnych przesunięć zębowych z zastosowaniem zmian temperatur przejścia pomiędzy stanem martenzytycznym „miękkim” a stanem austenitycznym „sprężystym”.

Opakowanie: Natural 1 op. / 5 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

	Natural	Damon
okrągłe	.013, .014, .016, .018	.013, .014, .016, .018
krawężne	.014/.025, .016/.025, .018/.025	.014/.025, .016/.025, .018/.025

Łuki beta-tytanowe (natural) 100-4-..., (ovoid) 101-4-...

BEZNIKLOWE



- bezniklowe
- korekta rotacji
- gładka, wypolerowana powierzchnia

Bezniklowe łuki bezpieczne dla pacjentów uczulonych na nikiel. Ich właściwości wpisują się pomiędzy niską giętkość łuków stalowych, a elastyczność łuków niklowo-tytanowych. Łuki posiadają umiarkowaną sprężystość i giętkość. Oddziałują z mniejszą siłą niż łuki stalowe, ale mają zdecydowanie lepszą formowalność. Doskonałe do tworzenia pętli i zagięć. Odpowiednia sztywność łuku zapewnia wcześniejszą korektę pozycji korzeni. Gładkie o zmniejszonym tarcia.

Opakowanie: 1 op./ 5 szt.

	Natural	Ovoid
okrągłe	.016, .018	.016, .018
krawężne	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025



ŁUKI SPECJALISTYCZNE


(opracowane we współpracy z prof. R. Nanda)

Stalowe POSTED ze słupkami 100-11-...

Stalowe łuki ze słupkami posiadają solidne łączenia i giętke, mosiężne słupki dla łatwego dopasowania. Łuki doskonale nadają się do retrakcji przedniego segmentu zębowego i konsolidacji przestrzeni. Zróżnicowane rozmiary dla dopasowania do każdej sytuacji ortodontycznej. Doskonałe do stosowania z elastikami i sprężynkami.

Opakowanie: 1 op./ 5 szt.

	Natural
Krawężne	.016/.022, .017/.025, .019/.025 od 22 mm do 44 mm

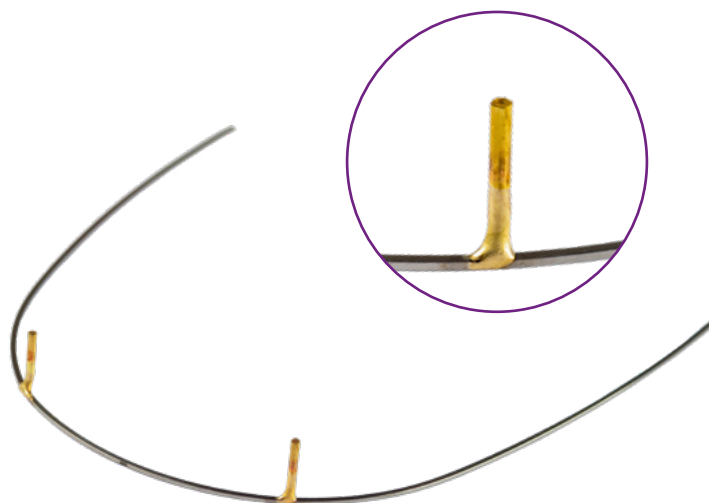


Łuki niklowo-tytanowe TORKUJĄCE 100-21-...

Doskonałe łuki dla dodania ekstra torku w przednim segmencie zębowym. Niklowo-tytanowe łuki torkujące dodają 20 stopni torku na górnych siekaczach bocznych i przyśrodkowych, pozostawiając tylny segment wolnym od dodatkowego torku. Wykonane ze stopu niklowo-tytanowego dostarczają niższych sił w porównaniu z alternatywnymi łukami stalowymi, jak również zapewniają pamięć kształtu i lepszą odporność na odkształcenia. Niklowo-tytanowe łuki torkujące są oznaczone kropkami dla łatwiejszej identyfikacji.

Opakowanie: 1 op./ 5 szt.

	Natural
Krawężne	.016/.022, .017/.025, .019/.025 28 mm dół, 34 mm góra, 38 mm góra

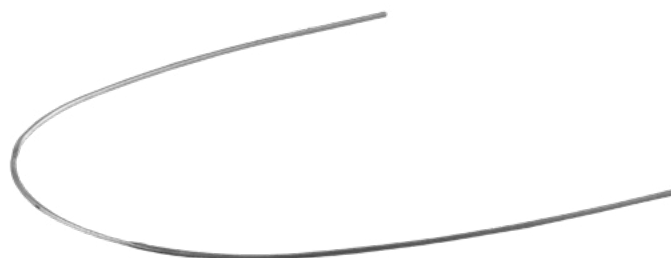


Łuki niklowo-tytanowe INTRUZYJNE 100-22-...

Łuki intruzyjne to doskonałe narzędzie zapewniające absolutną intruzję przednich zębów, trzonowe przechylenie, wychylenie siekaczy oraz poziomowanie przechylnych przednich płaszczyzn zgryzowych. Łuk dostępny jest jako łuk niklowo-tytanowy superelastyczny, górny oraz dolny, krótki lub długi. Łuki długie zalecane są do stosowania w przypadkach bezekstrakcyjnych i/lub w przypadkach pacjentów z długim łukiem zębowym. Łuki krótkie zaleca się do stosowania u osób po ekstrakcji zębów przedtrzonowych. Siłę łuku tworzą mniejsze lub większe zagięcia na tylnych ramionach łuku.

Opakowanie: 1 op./ 5 szt.

	Natural
Krawężne	.016/.022, .017/.025 short – ekstrakcyjne, long – bezekstrakcyjne góra/dół

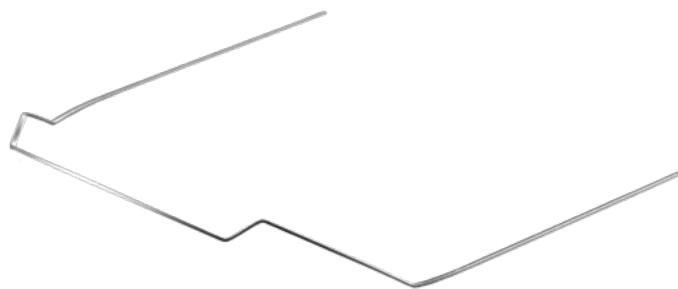


Łuki beta-tytanowe z PĘTLAMI OMEGA 100-41-...

Łuki wykonane są z zaawansowanego technologicznie bez-niklowego stopu beta-tytanowego. Pre-formowane pętle i stała siła redukują czas jaki pacjent spędza na fotelu. Zaokrąglona dziąsłowa część pętli zapewnia komfort pacjenta, eliminując konieczność dogięć. Doskonałe do zamykania przestrzeni, przedniej intruzji, retrakcji i zaczepiania elastików. Od 24 mm do 40 mm aktywujemy w przestrzeni między bocznym siekaczem a kłem; rozmiar 52 mm aktywujemy między kłem a pierwszym zębem przedtrzonowym.


Opakowanie: 1 op./ 5 szt.

	Natural
Krawężne	.016/.022 (24-40 mm), .017/.025 (24-52 mm), .019/.025 (24-40 mm)

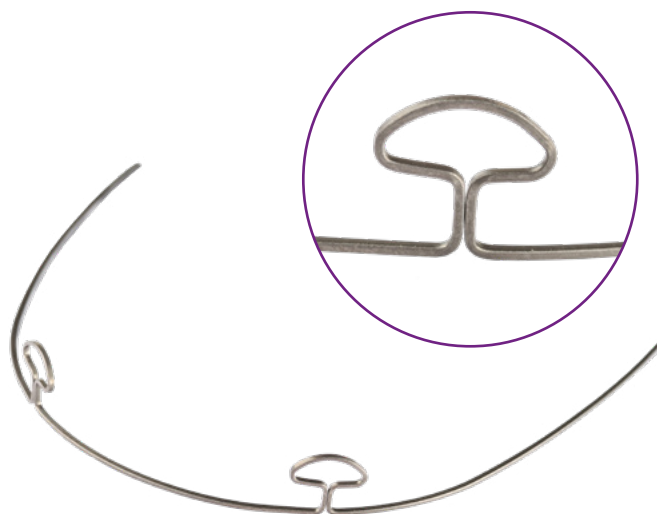

Łuki niklowo-tytanowe z krzywą spee prosta noga 100-71-...

Niklowo-tytanowe łuki z odwróconą krzywą gdzie proste odcinki boczne dostarczają lekkich do umiarkowanych stałych sił. Łuki te są giętke i posiadają doskonałą pamięć kształtu. Przednia część łuku posiada krzywą, podczas gdy końcówki łuku są płaskie i wypoziomowane. Doskonale nadają się do początkowego poziomowania i szeregowania łuków zębowych. Zapobiegają przechyleniom zębów trzonowych i rotacjom. Utrzymują przedni tor, konsolidują segmenty zębowe oraz korygują zgryz głęboki i/lub otwarty. Łuki mogą być stosowane do nadawania policzkowego toru zębów trzonowych. Łuki te nadają się również do intruzji i ekstrakcji. Odwrócone mogą być stosowane do rozszerzenia dolnego łuku zębowego i zamykania przestrzeni poekstrakcyjnych.

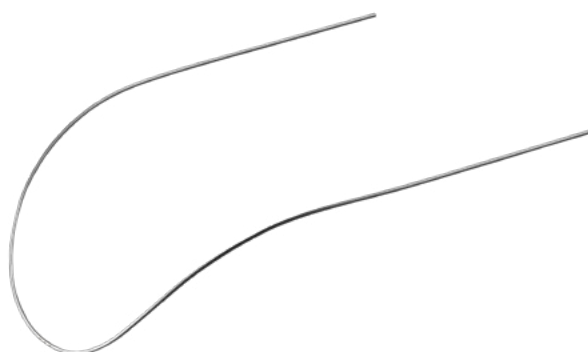


Opakowanie: 1 op./ 5 szt.

	Natural
Okrągłe	.016, .018
Krawężne	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .019/.025

Łuki niklowo-tytanowe z krzywą spee 100-7-...

Te superelastyczne niklowo-tytanowe łuki pozostają stale aktywne, redukując przy tym liczbę koniecznych zmian łuków. Dzięki swojemu unikalnemu kształtowi doskonale korygują zgryz głęboki i zgryz otwarty, zapobiegają rotacji zębów trzonowych i utrzymują przedni tor. Odwrócona krzywa spee zapobiega przechylaniu trzonowców. Zapewniają maksymalną efektywność retrakcji bez znacznych zmian łuku. Konsolidują i poszerzają łuk zębowy. Idealne do początkowego szeregowania oraz również poziomowania.

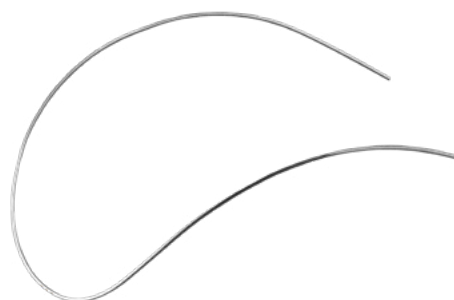

Opakowanie: 1 op./ 5 szt.


	Natural
Okrągłe	.014, .016, .018, .020
Krawężne	.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025

Łuki stalowe skręcane 3 nitki (natural) 100-13-...

Składa się z trzech okrągłych, precyzyjnie splecionych nitek, które tworzą jeden łuk. Łuk zapewnia delikatne poziomowanie podczas wczesnych faz leczenia oraz doskonałą odkształcalność. Łuki zapewniają umiarkowaną siłę, która maleje wraz z przesunięciami zębowymi. Łuki te są również wykorzystywane w fazie retencji.

Opakowanie: 1 op./ 10 szt.

	Natural
Okrągłe	.0155, .0175, .0195 góra/dół

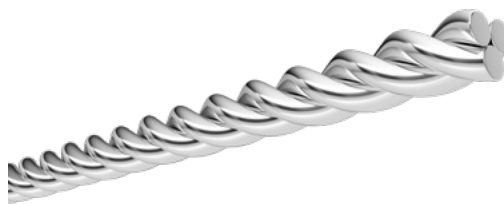


Łuki stalowe skręcane 6 nitek (natural) 100-16-...

Łuk składa się z pięciu jednakowych łuków owiniętych wokół łuku o takim samym przekroju. Łuk zapewnia dobrą odkształcalność, co pozwala na wykonanie precyzyjnych dogięć. Łuki zapewniają siły niskie do umiarkowanych. Dodatkową zaletą łuków jest krótki czas aktywacji – siła łuku maleje wraz z przesunięciami zębowymi.

Opakowanie: 1 op./ 10 szt.

	Natural
Okrągłe	.0155, .0175, .0195 góra/dół

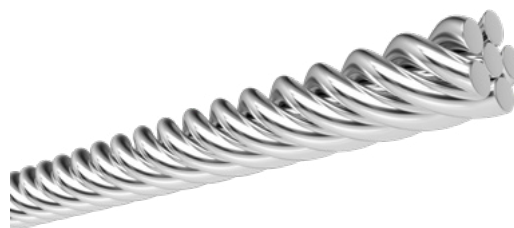

Łuki stalowe skręcane 8 nitek (natural) 100-18-...

Łuk składa się z ośmiu nitek o jednakowym rozmiarze ciasno ściśniętych w najpopularniejsze rozmiary łuków o przekroju krawężnym. Łuki zapewniają doskonałą odkształcalność, idealne do zastosowania w pierwszej fazie leczenia, zapewniają dobrą kontrolę poprzez całkowite wypełnienie slotu zamka. Łuki zapewniają niskie siły, idealnie nadają się do poziomowania, kontroli torku i do fazy finishingu.

Opakowanie: 1 op./ 10 szt.

	Natural
Krawężne	.016/.022, .017/.025, .019/.025 góra/dół



PIERŚCIE NIE ORTODONTYCZNE

Wykonane są z bardzo dobrej jakości stali nierdzewnej. Posiadają dodatkowe zaczepy lutowane bezpośrednio do obręczy, które stosowne są do każdej sytuacji klinicznej. Odpowiednie ukształtowanie zgryzowe oraz dziąsłowe zapewnia doskonałe dopasowanie oraz przeciwdziałają wypłukiwaniu cementu, redukując przy tym jednocześnie podrażnienie tkanek. Każdy w pełni uzbrojony pierścień posiada wyprofilowaną bazę dla skuteczniejszego dopasowania się do anatomii zęba. Oznakowania rozmiaru na każdym z pierścieni ułatwiają identyfikację, natomiast mikrowytrawiona wewnętrzna powierzchnia ułatwia cementowanie oraz zwiększa siłę klejenia. Dodatkowe wzmocnienia na zewnętrznej krawędzi pierścieni zapobiegają deformacji.

- ▶ zwiększona retencja ◀
- ▶ odporne na deformacje ◀
- ▶ precyzyjnie dopasowanie zgryzowo-dziąsłowe ◀
- ▶ stałe oznaczenia identyfikacyjne ◀

Pierścienie na pierwsze zęby trzonowe (6) 300L(ROTH), 301L (MBT), 303L(ROTH)



Preskrypcja: Roth, MBT

Rozmiar: 29,5-44 (co pół rozmiaru)

PIERŚCIE NIE NA 6 ROTH	TORK	OFFSET
UR	-10	8
UL	-10	8
LL	-25	8
LR	-25	8

PIERŚCIE NIE NA 6 MBT	TORK	OFFSET
UR	-14	8
UL	-14	8
LL	-20	8
LR	-20	8

Pierścienie na drugie zęby trzonowe (7) 304L-...

UR7 Skrzydełko



PIERŚCIEŃ NA 7 ROTH	TORK	OFFSET
UR	-10	8
UL	-10	8
LL	-25	8
LR	-25	8

Preskrypcja: Roth

Rozmiar: 29,5-42 (co pół rozmiaru)

Pierścienie na zęby przedtrzonowe (4 i 5) 305L-...

Pierścień na 4,5



PIERŚCIEŃ NA 4/5 ROTH	TORK	OFFSET
UR	-7	0
UL	-7	0
LL	-22	0
LR	-22	0

Preskrypcja: Roth


Rozmiar: 1-24 góra, 3-26 dół (co rozmiar)

RURKI POLICZKOWE



Wykonane z jednego elementu techniką MIM. Mikrowytrawiona podstawa rurki ułatwia przyklejanie, a idealnie wyprofilowana baza z dodatkową 80-oczkową siateczką, zwiększa siłę retencji. Gładkie, zaokrąglone powierzchnie i niski meżalny haczyk zapewniają komfort pacjenta. Duże lejkowate wejście służy jako prowadnica podczas wkładania łuku. Kolorowe oznakowanie ułatwia identyfikację. Odpowiednie, policzkowe wyprofilowanie zapewnia stabilność podczas umieszczania rurki i gwarantuje pewne uchwycenie pęsetą. Rurki dostępne na pierwsze i drugie zęby trzonowe, na szczękę i żuchwę, w wersji standardowej oraz otwierane, w słocie .018 oraz .022, w preskrypcji 0 tork, Roth oraz MBT, pojedyncze i podwójne.

Rurki pojedyncze na pierwsze zęby trzonowe (6) 201-1-22/18...R/M, 201-2-22/18...R/M

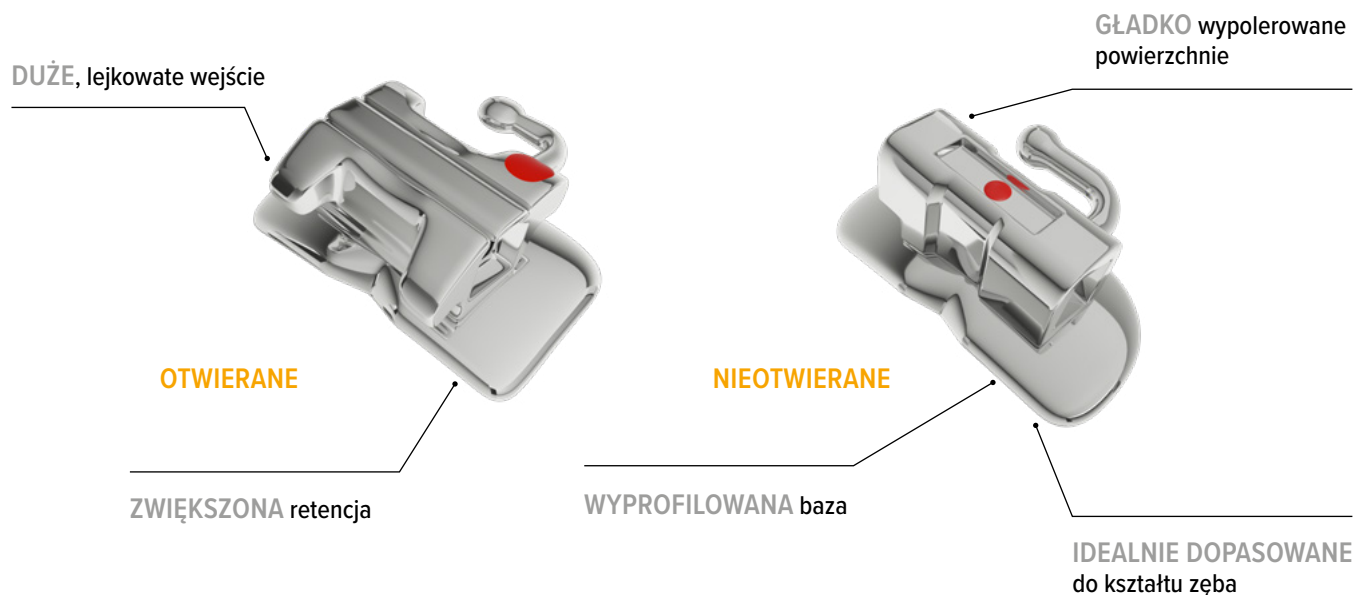

Preskrypcja: Roth, MBT

RURKI NA 6 ROTH OTWIERANE	TORK	OFFSET
UR	-10	7
UL	-10	7
LL	-25	4
LR	-25	4

RURKI NA 6 MBT OTWIERANE	TORK	OFFSET
UR	-10	7
UL	-10	7
LL	-10	0
LR	-10	0

RURKI NA 6 ROTH NIEOTWIERANE	TORK	OFFSET
UR	-9	7
UL	-9	7
LL	-30	0
LR	-30	0

RURKI NA 6 MBT NIEOTWIERANE	TORK	OFFSET
UR	-14	10
UL	-14	10
LL	-20	0
LR	-20	0


Rurki pojedyncze nieotwierane na drugie zęby trzonowe (7) 201-1-22...R/M

NIEPOWTARZALNY design

KOLOROWE OZNAKOWANIE
dla łatwiejszej identyfikacji

mechaniczna retencja

STAL nierdzewna 17-4

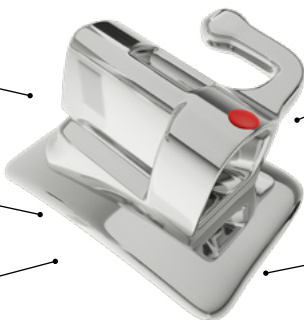80-OCZKOWA MIKROWYTRAWIONA
SIATECZKOWA PODSTAWA
zwiększająca siłę klejenia

RURKI NA 7 ROTH	TORK	OFFSET
UR	-14	14
UL	-14	14
LL	-30	6
LR	-30	6

RURKI NA 7 MBT	TORK	OFFSET
UR	-14	10
UL	-14	10
LL	-10	0
LR	-10	0

Rurki podwójne na pierwsze zęby trzonowe

202-1-22/18...M , 201-2-22/18...R



Preskrypcja: Roth, MBT

RURKI NA 6 ROTH PODWÓJNE	TORK	OFFSET
UR	-14	10
UL	-14	10
LL	-25	4
LR	-25	4

Rurki samoligaturujące Prestige

204-1-22...M



Preskrypcja: MBT

RURKI NA 6 MBT PRESTIGE	TORK	OFFSET
UR	-14	10
UL	-14	10
LL	-20	0
LR	-20	0

Rurki pojedyncze 0 TORK

201-0-22...



Preskrypcja: 0 torqu

RURKI NA 6 ZERO TORK	TORK	OFFSET
UR	0	6
UL	0	6
LL	0	6
LR	0	6

Rurki pojedyncze frezowane niskoprofilowe

203-2-22...R/M



Preskrypcja: Roth, MBT

RURKI NA 6 ROTH OPTIMA NIEOTWIERANE	TORK	OFFSET	RURKI NA 6 MBT OPTIMA NIEOTWIERANE	TORK	OFFSET
UR	-9	0	UR	-14	0
UL	-9	0	UL	-14	0
LL	-30	0	LL	-20	0
LR	-30	0	LR	-20	0

SPRĘŻYNKI



Sprężynki wykonane są z super elastycznego stopu niklowo-tytanowego oraz stali, dzięki któremu otwierają i zamykają przestrzeń ze stałymi i przewidywalnymi rezultatami. Zamykające sprężynki posiadają unikatowy design pętli pozwalających na łatwe zaczeplenie i zdjęcie sprężynki. Otwarte sprężynki zapewniają stałe przesunięcia zębów, delikatne i bezbolesne dla pacjenta. Sprężynka może być rozciągnięta do dwukrotnej swojej długości nie tracąc przy tym swoich właściwości. Maksymalna wydajność w otwieraniu przestrzeni. Sprężynkę należy umieścić na łuku i ścisnąć pomiędzy zamkami.

Sprężynka niklowo-tytanowa otwarta 501-1-...



Rozmiar: .009/.030, .010/.030, .010/.036, .012/.030

Opakowanie: szpula

Długość: 40 cm

Sprężynka torkująca 501-3..



Rozmiar: .016x.022, .017x.025, .018x.025

Opakowanie: 1 op. /10 szt.

Sprężynka niklowo-tytanowa zamknięta 501-2-...



Rozmiar: 008, 010

Opakowanie: 1 op. / 10 szt.

Długość: 6 mm, 9 mm, 12 mm

Sprężynka niklowo-tytanowa dystalizująca 501-3



Rozmiar: .010/.045

Opakowanie: szpula

Długość: 40 cm

Sprężynka niklowo-tytanowa do mikroimplantów, duże oczka 501-22-



Rozmiar: .008, .010, .012

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Długość: 6 mm, 9 mm, 12 mm

Sprężynka stalowa otwarta 501-11-



Rozmiar: .010/.030

Opakowanie: szpula

Długość: 105 cm

Sprężynka niklowo-tytanowa do mikroimplantów, oczko duże, oczko małe 501-23-...



Rozmiar: .008, .010, .012

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Długość: 6 mm, 9 mm, 12 mm

Sprężynka stalowa zamknięta 501-21-



Rozmiar: .010/.030

Opakowanie: szpula

Długość: 90cm



MASKI I WYCIĄGI

Maska twarzowa 601

Maska stosowana jest do korekty wad klasy III. Wykonana jest z nierdzewnej stali i odpornego, wysokiej jakości tworzywa. Lekka konstrukcja i komfortowy projekt zapewnia wygodę pacjenta. Możliwość dopasowania elementów sprawia iż jest to produkt uniwersalny, odpowiedni dla każdego pacjenta. Opakowanie zawiera zapasowe podkłładki, kluczyk i wymienne śruby.



lekka, trwała konstrukcja

uniwersalna


* opakowanie zawiera dodatkowe podkłładki

Wyciągi do maski twarzowej 408-073 ½ 8 oz, 408-074 ½ 16 oz

Opakowanie: 1 op./1000 szt.

Rozmiar: Rozmiar: 1/2"

Siła: 8 oz., 16 oz.

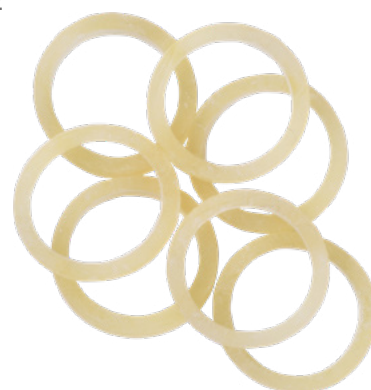

Wyciąg zewnętrzny niski 602-2 (wyciąg karkowy + łuk twarzowy)

Wyciąg karkowy

Miękki wyciąg karkowy zapewnia maksimum komfortu, jednocześnie znacząco redukuje ryzyko wyslizgnięcia się. Ponowne założenie wyciągu jest bardzo łatwe. Stalowa sprężyna pozwala na dobranie odpowiedniej siły. Posiada różne siły naciągu.



Przekrój łuku: .045

Angulacja: 0°

Łuk twarzowy

Łatwy w dopasowaniu, wygodny dla pacjenta, trwały. Gładkie i czyste laserowo doczepiane zaczepy. Łuk wykonany jest z trwałego drutu. Higieniczny, odporny na korozję. Permanentnie oznaczony linią pośrodkową. Uniwersalny rozmiar daje możliwość dopasowania do każdego przypadku klinicznego.



Wyciąg zewnętrzny wysoki – czepiec z modułami 602-1

Łatwy w dopasowaniu. Konstrukcja czapki zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i trwałość materiału. Ponowne założenie wyciągu jest bardzo łatwe. Stalowa sprężyna pozwala na dobranie odpowiedniej siły. Posiada różne siły naciągu.



* nie zawiera łuku twarzowego

ELASTOMETRY

									
1 Fuksja Łańcuszek	2 Ciemne czerwone Łańcuszek	3 Czerwone Łańcuszek	4 Ciemne pomarańczowe Łańcuszek	5 Pomarańczowe Łańcuszek	6 Srebrne Łańcuszek	7 Różowe Łańcuszek	8 Ciemne różowe Łańcuszek	9 Jasne różowe Łańcuszek	10 Neonowe fioletowe Łańcuszek
									
11 Fioletowe Łańcuszek	12 Złote Łańcuszek		14 Neonowe zielone Łańcuszek	15 Zielone Łańcuszek	16 Ciemne fioletowe Łańcuszek	17 Krystaliczne ciemne niebieskie	18 Krystaliczne niebieskie	19 Czarne Łańcuszek	20 Ciemne metaliczne niebieskie Łańcuszek
									
21 Ciemne niebieskie Łańcuszek	22 Szafirowe niebieskie Łańcuszek	23 Ciemne metaliczne fioletowe	24 Krystaliczne fioletowe	25 Białe Łańcuszek	26 Żółte Łańcuszek	27 Przezroczyste Łańcuszek	28 Jasne niebieskie Łańcuszek	29 Kremowe	30 Turkusowe Łańcuszek
									
31 Pustynne niebieskie Łańcuszek	32 Neonowe niebieskie Łańcuszek	33 Krystalicznie żółte	34 Jasne fioletowe Łańcuszek	35 Perłowe zielone	36 Perłowe jasne zielone	37 Wiśniowe	38 Perłowe niebieskie	39 Perłowe trawiaste	40 Perłowe

LIGATURY ELASTYCZNE BEZŁATEKSOWE

Wykonane są z super elastycznego, wytrzymałego materiału. Odporne na wilgoć, przebarwienia i zapach. Cienkie ścianki ligatur ułatwiają zakładanie pod skrzydełka zamka. Dostępne w szerokiej gamie kolorów i odcieni, odpowiadających zarówno dorosłym jak i dzieciom, dziewczynom i chłopcom.

Ligatury pałeczki

400-...



Uchwyt do trzymania (dwoma palcami).

Opakowanie: 1 op./1040 szt. – 40 pałeczek

Ligatury kółko

400-...0



Z uchwytem na palec (kółko).

Opakowanie: 1 op./520 szt. – 20 pałeczek

Łańcuszki elastyczne 401-...(S, L, C)

Wykonane są z superelastycznego, wytrzymałego materiału, który dostarcza kontynuującej, lekkiej siły. Odporne na wilgoć, odbarwienia i zapach. Cienkie ścianki łańcuszka ułatwiają zakładanie łańcuszka pod skrzydełka zamka. Dostępne są w trzech rozmiarach, w szerokiej gamie kolorów i odcieni.

continue



short



long



Długość: 4,6m

INNE ELASTOMERY

Wyciągi wewnętrzne 402-... (L, M, MH, H)

Wykonane są z najlepszej jakości bursztynowego, chirurgicznego lateksu. Oznakowanie zwierzętami ułatwia identyfikację. Wyciągi dostępne są w czterech siłach: lekkiej, średniej, średnio-silnej i silnej oraz w pięciu rozmiarach 1/8", 3/16", 1/4", 5/16"; 3/8", pakowane są po 100 sztuk w saszetce.

Opakowanie: 1 saszetka/100 szt. (Karton zawiera 50 saszetek)



402-18L Zając
1/8" (3,2 mm)
Lekkie (2,5 oz)



402-316L Wiewiórka
3/16" (4,8 mm)
Lekkie (2,5 oz)



402-14L Jaskółka
1/4" (6,4 mm)
Lekkie (2,5 oz)



402-516L Gęś
5/16" (7,9 mm)
Lekkie (2,5 oz)



402-38L Owca
3/8" (9,4 mm)
Lekkie (2,5 oz)



402-18M Orzeł
1/8" (3,2 mm)
Średnie (3,5 oz)



402-316M Jeleń
3/16" (4,8 mm)
Średnie (3,5 oz)



402-14M Lis
1/4" (6,4 mm)
Średnie (3,5 oz)



402-516M Osiołek
5/16" (7,9 mm)
Średnie (3,5 oz)



402-38M Kozica
3/8" (9,4 mm)
Średnie (3,5 oz)



402-18MH Wąż
1/8" (3,2 mm)
Średnio-silne (4,5 oz)



402-316MH Myszka
3/16" (4,8 mm)
Średnio-silne (4,5 oz)



402-14MH Sowa
1/4" (6,4 mm)
Średnio-silne (4,5 oz)



402-516MH Swinia
5/16" (7,9 mm)
Średnio-silne (4,5 oz)



402-38MH Bóbr
3/8" (9,4 mm)
Średnio-silne (4,5 oz)



402-18H Niedźwiedź
1/8" (3,2 mm)
Silne (6,5 oz)



402-316H Żubr
3/16" (4,8 mm)
Silne (6,5 oz)



402-14H Wilk
1/4" (6,4 mm)
Silne (6,5 oz)



402-516H Koń
5/16" (7,9 mm)
Silne (6,5 oz)



402-38H Dzik
3/8" (9,4 mm)
Silne (6,5 oz)

Haczyki do zakładania wyciągów 706


Precyzyjne haczyki do zakładania wyciągów posiadają dwie różne końcówki, dodatkowo mają liczne wypustki dzięki którym łatwiej jest je trzymać w wybranej pozycji niwelując ślizganie się.



Opakowanie: 1 op./100 szt.

Separacje ortodontyczne „S” 405


Wykonane są z superelastycznego, wytrzymałego materiału w kształcie litery „S”. Odporne na wilgoć, odbarwienia i zapach.

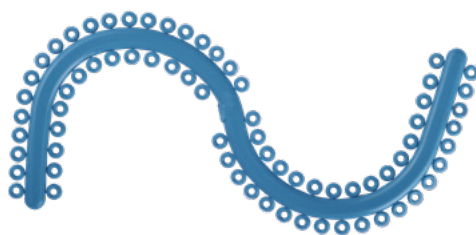

Opakowanie: 1 op./1050 szt.

Separacje ortodontyczne z poduszczkami 405-1

Separacje ortodontyczne z poduszczkami na gwieździe, kolor fioletowy.

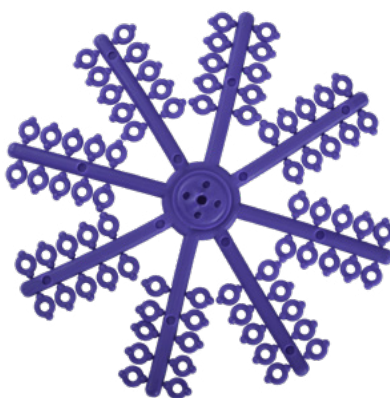

Opakowanie: 1 op./480 szt.

Trainery 706-...

Trainer to doskonały wybór do wstępnej korekty przed ortodontyczną dla dzieci z uzębieniem mieszanym. Aparat ustawia „krzywe zęby” w prawidłowej pozycji. Powstrzymuje nacisk języka, warg i policzków na zęby. Koryguje złe ułożenie języka i dzięki temu usuwa przyczynę złego ustawienia zębów. Trainer umożliwia zamianę szkodliwego oddychania ustami na zdrowe oddychanie nosem. Aparat dostępny jest w jednym rozmiarze, ale w dwóch odmianach. W pierwszej fazie leczenia używa się trenera z wysoce elastycznego silikonu, zaś w drugiej fazie trenera z trochę sztywniejszego materiału (poliuretanu), lekko usztywnionego lecz nadal elastycznego.

wczesna korekta




Fazy: I i II

ELEMENTY METALOWE



Ligatury

Ligatury Kobayashi krótkie 502-22...

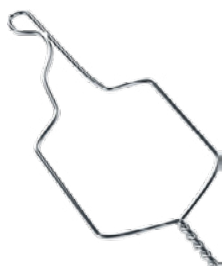

Opakowanie: tuba, 1 op./100 szt.
Przekrój: .012, .014

Ligatury metalowe krewetki krótkie 502-21-10




Opakowanie: tuba, 1 op./500 szt.
Przekrój: .010

Ligatury Kobayashi krótkie 502-2



Opakowanie: saszetka, 1 op./100 szt.
Przekrój: .012

Ligatury metalowe długie 502-11-10

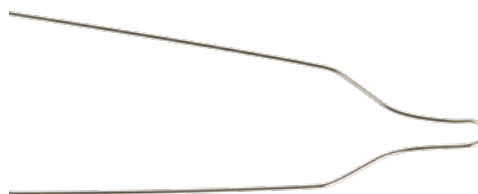

Opakowanie: tuba, 1 op./1000 szt.
Przekrój: .010

Ligatury Kobayashi długie 502-1



Opakowanie: saszetka, 1 op./100 szt.
Przekrój: .012

Drut ligaturowy 503-...

Miękki drut ligaturowy dostępny jest na ekonomicznej 30 gramowej rolce. Doskonały wybór dla lekarzy, którzy preferują własnoręcznie wykonywać ligatury.



Kod	Przekrój	Długość nawoju
503-08	.008	122 metry
503-10	.010	78 metry
503-12	.012	54 metry

GUZICZKI

Haczyk trakcyjny 504-1K

Opakowanie: 1 op./10 szt.



Guziczki na okrągłej podstawie 504-1

Opakowanie: 1 op./10 szt.



Guziczki na okrągłej podstawie z dziurkami (durszlak) 504-1H

Opakowanie: 1 op./10 szt.



Guziczki na okrągłej podstawie zaczep z oczkiem 504-1P

Opakowanie: 1 op./10 szt.



Guziczki na kwadratowej podstawie 504-2

Opakowanie: 1 op./10 szt.



Guziczki estetyczny na okrągłej podstawie 507-1

Opakowanie: 1 op./10 szt.



Guziczki z łańcuszkiem złoty, srebrny 504-1C, 504-1G

Łańcuszek należy odciąć na odpowiedniej wysokości tak, aby móc prze-wlec łuk przez jedno z ogniw. Zaczep ten jest doskonałym elementem do ściągania zębów zatrzymanych



Kolor: złoty lub srebrny

Opakowanie: 1 op./2 szt.

ZACZEPY ORTODONTYCZNE

Skrzydółko 509-1



Opakowanie: 1 op./10 szt.

Haczyki lewostronne i prawostronne 505-2, 505-3



Opakowanie: 1 op./10 szt.

Haczyki zaciskowe z kuleczką 505-1



Opakowanie: 1 op./10 szt.

Haczyki podwójne, prawostronne i lewostronne z podstawą do klejenia 505-4, 505-5



Opakowanie: 1 op./10 szt

Stopper otwarty 506-1



Opakowanie: 1 op./10 szt.

Stopper zamknięty 506-2-2, 506-2-3



Opakowanie: 1 op./ 10 szt.
Szerokość: 2 mm lub 3 mm

DODATKI

Kolce językowe 509-2P



Opakowanie: 1 op./10 szt.

Łuk podniebienny 508-...



Opakowanie: 1 szt.
Rozmiary: 37mm 39 41 43 45 47 49 51 53mm

MINI MOLD

Mini Mold to silikonowe formy do tworzenia zaczepów ortodontycznych. Jest to jeden z najnowszych i najlepszych sposobów na utwardzanie światłem własnych łączników żywicznych w ciągu kilku sekund. Dzięki różnym kształtom foremki silikonowe pozwalają na szybkie i łatwe wykonanie pracy. Wystarczy napełnić końcówkę, umieścić ją na zębie i utwardzić. Utwardzone elementy są bardzo komfortowe i łatwe do wyrównania.



Indeks	Nazwa
507-P	Foremki Ortodontyczne Mini Mold - zestaw (7 szt. mix + szpatułka)
507-P1	Foremka Mini Mold - guziczek (10 szt.)
507-P2	Foremka Mini Mold - Turbo Bite (10 szt.)
507-P3	Foremka Mini Mold - Kolce językowe (10 szt.)
507-P4	Foremka Mini Mold - Rurka policzkowa (10 szt.)
507-P5	Foremka Mini Mold - Zamek (10 szt.)
507-P6	Foremka Mini Mold - Retainer (10 szt.)
507-P7	Foremka Mini Mold - nakładka okluzyjna (10 szt.)

AKCESORIA ORTODONTYCZNE

Wosk 701.. (A, B, G, M, O, S)

Wosk ochronny dla pacjenta, stosowany jest do ochrony tkanki miękkiej. Łatwy w nałożeniu, zapewnia natychmiastową, miejscową ulgę.

Zapachy: bezzapachowy, miętowy, jabłkowy, truskawkowy, winogronowy, pomarańczowy



Łyzki wyciskowe 705...

Wysokie brzegi łyżek pozwalają na dokładne odwzorowanie zgryzu i tkanki miękkiej. Spośród sześciu rozmiarów górnych i dolnych łyżek z łatwością można dobrać rozmiar zarówno dla dziecka jak i pacjenta dorosłego. Każdy rozmiar oznaczony jest innym kolorem i numerem. Perforowane łyżki powodują natychmiastowe mechaniczne zamknięcie materiału wyciskowego. Jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Zalecana zimna sterylizacja.

6 rozmiarów: góra/dół

Kolory: czerwony (1), pomarańczowy (2), niebieski (3), zielony (4), żółty (5), fioletowy (6)



Pudełka na aparaty

702 (z dziurkami, rozm. M, mix kolorów),
702-1 (bez dziurek, rozm. M, mix kolorów),
702-2 (bez dziurek, rozm. L, mix kolorów),
702-3, (z dziurkami, rozm. L, kolor mleczny)

Wykonane są z wysokiej jakości trwałego plastiku. Pudełka na aparaty łączą w sobie nowoczesny, wyprofilowany kształt i łatwe w użyciu, bezpieczne zamknięcie.



Rozwieraki policzków 703S, 703M, 703L

Doskonale nadają się do leczenia uzębienia z otwartymi ustami lub w zgryzie zamkniętym. Niezbędne podczas wykonywania zdjęć.

Rozmiary: małe (S), średnie (M) i duże (L).




Rozwieraki boczne 703-1, 703-2

Rozwieraki boczne do policzków ułatwiają pracę podczas leczenia, zapewniają doskonały dostęp do jamy ustnej pacjenta. Wyprofilowana konstrukcja produktu pozwala na komfortowe użytkowanie. Wykorzystanie rozwieraków pozwala na lepszą ekspozycję zębów. Są dostępne w dwóch rozmiarach – małe i duże. Pakowane są po dwie sztuki (po jednej na każdą ze stron).

Rozmiary: op. 2 szt., małe (S) i duże (L).



Lusterka stomatologiczne 704-...

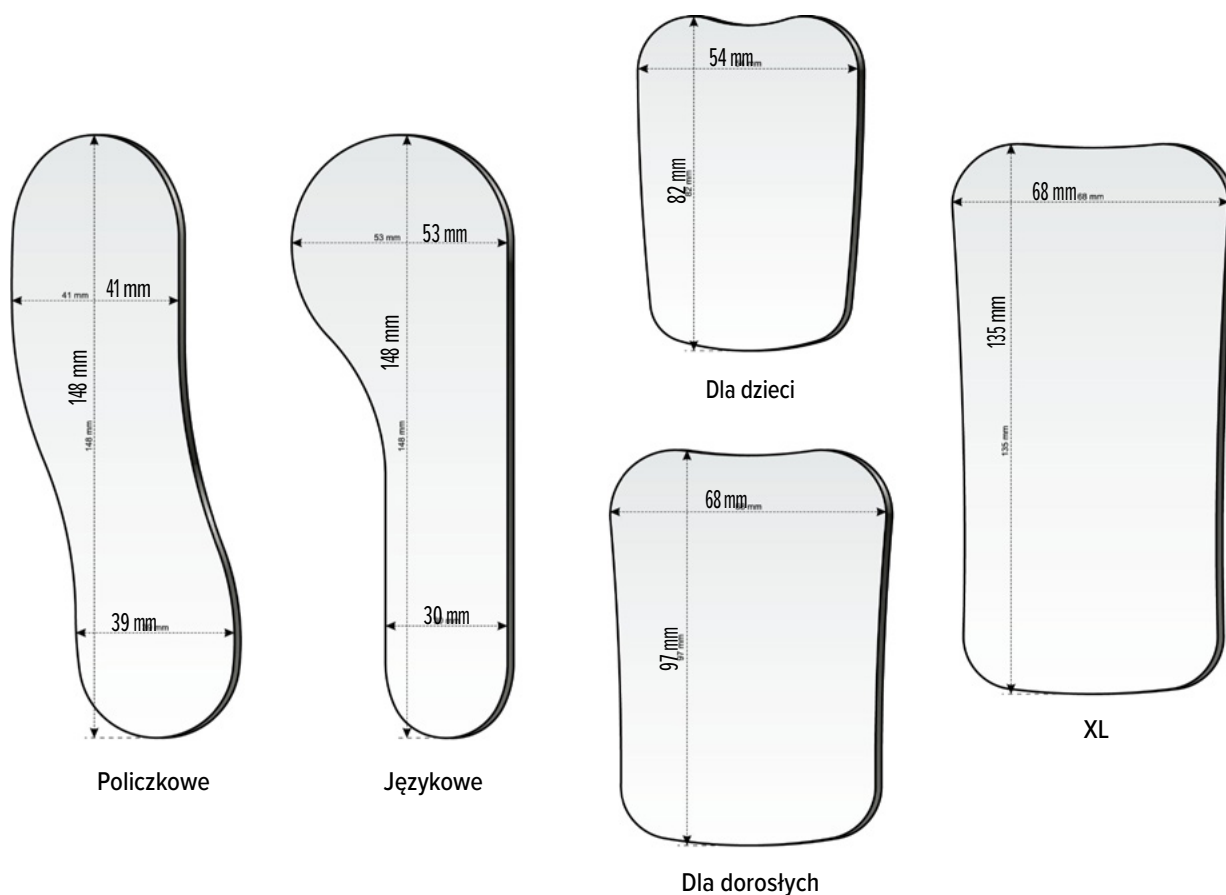

Lusterka szklane mają dokładniejszy stopień odbicia niż lusterka chromowane. Gładkie, zaokrąglone brzegi oraz jego grubość zapewniają większy komfort pacjentowi. Dwustronne odbicie, odporność na zniszczenia gwarantuje dwa razy dłuższy czas użytkowania. Można je sterylizować w autoklawie w cyklu 135'(F)/ 180'(°C). Dostępne są w pięciu różnych kształtach.

Kody produktów	Opis produktu
704-1	Lusterko stomatologiczne policzkowe
704-2	Lusterko stomatologiczne językowe
704-3	Lusterko stomatologiczne zgryzowe dla dzieci
704-4	Lusterko stomatologiczne zgryzowe dla dorosłych
704-5	Lusterko stomatologiczne zgryzowe XL

Nitka elastyczna clear 403-3

Produkt o doskonałej rozciągliwości ułatwiający leczenie ortodontyczne. Po rozciągnięciu powraca do pierwotnego kształtu. Nitka jest odporna na przebarwienia.

Grubość/średnica: .025

Długość: 745 cm



Rurka ochronna (przezroczysta) 403-1, (szara) 403-2

Jest z mocnego i elastycznego materiału. Zakładana na łuk lub małą sprężynkę pozwala zapobiec podrażnieniom tkanki miękkiej.



Kolor: szara lub przezroczysta

Średnica zewnętrzna przezroczysta: 1 mm

Średnica zewnętrzna szara: 1,5 mm

Długość: 365 cm


Kliny rotacyjne

(przezroczyste) 406-1, (szare) 406-2

Bezłateksowe, formowane, perforowane kliny przeznaczone są do założenia pod skrzydełka zamka. Skrzydełko klinu stanowi punkt podparcia pomiędzy łukiem a zamkiem i pozwala na efektywną rotację zęba. Odporne na przebarwienia, wilgoć i zapach.

Kolor: przezroczyste lub szare

Opakowanie: 1 op./100 szt.

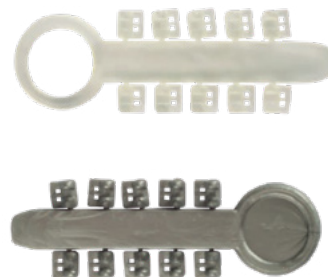

Zestawy ortodontyczne w twardym opakowaniu ZOR, ZON, ZOZ

Zestaw ortodontyczny spełnia wszystkie potrzeby dotyczące higieny zębów pacjentów ortodontycznych. Zestaw zawiera szczoteczkę ortodontyczną, szczoteczkę podróżną, czyścik międzyzębowy, wosk ochronny, nić dentystyczną oraz klepsydrę do pomiaru czasu szczotkowania. Wszystkie elementy spakowane są w kolorowe, wytrzymałe, estetyczne plastikowe etui.



Kolor: niebieski, różowy, zielony ■■■

Zestawy ortodontyczne w miękkim opakowaniu ZOZ M, ZOR M

Zestaw zamykany na suwak spełnia wszystkie potrzeby dotyczące higieny zębów pacjentów ortodontycznych. Zestaw zawiera szczoteczkę ortodontyczną, szczoteczkę podróżną, czyścik międzyzębowy, wosk ochronny, nić dentystyczną, lusterko stomatologiczne oraz przewłeczkę do nici dentystycznych. Zajmuje mało miejsca.



Kolor: różowy lub zielony ■■

Jednostronne paski do strippingu (4 mm) 106-221, (6 mm) 106-224, (8 mm) 106-227



Opakowanie: 1 op./12 szt.

Szerokość: 4 mm, 6 mm, 8 mm

Kalka cefalometryczna 603

Dzięki gładkiej, matowej powierzchni oraz przezroczystości obraz jest ostry i dobrze widoczny.



Ilość kartek: 100 szt.

RETENCJE RELIANCE



Retainer Bond-A-Braid BAB2



Doskonały sposób na wzmocnienie stałej retencji to płaski, miękki, ośmionitkowy skręcany drut. Szynowanie drutem zapobiega problemom utraty kontroli torku, które mogą wystąpić podczas stosowania okrągłego, skręcanego drutu. Drut naklejony na wewnętrzną stronę górnych siekaczy możemy dopasować tak, aby nie występowały żadne interferencje zębowe. Łatwo dopasowujący się, miękki drut zapobiega przesunięciom zębowym powodowanym przez aktywne siły łuków. Można go stosować do zamykania diastemy lub utrzymania przestrzeni poekstrakcyjnych. Doskonały również do wykonywania szyn dla pacjentów z problemami periodontologicznymi.

Opakowanie: 10 szt.

Drut .027" x.011

Drut płaski beznikłowy do retainerów Retainium RET



Retainium jest pojedynczą, beznikłową, tytanową, płaską taśmą o zwiększonej wytrzymałości. Retainium eliminuje potencjalne problemy z alergią pacjentów na nikiel i ma zmniejszony współczynnik zużycia.

- Zgina się interproksymalnie
- Nie zawiera niklu
- Kompatybilny z MRI
- Najniższy profil
- Łuk wstępowy 0,027" x 0,011".

Opakowanie: 1op./10szt.

Retainer OrthoFlex Stainless Steel Stalowa SSFOT



Ortho FlexTech — system retencji dentystycznej nowa generacja retencji językowej. Ortho FlexTech jest przeznaczony do utrzymywania pozycji zęba po leczeniu ortodontycznym. Stal nierdzewna zapewnia zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie i skręcanie.

Opakowanie: szpula 75cm

Retainer OrthoFlex Gold Białe złoto OFT2



Retencja językowa z zastosowaniem łańcuszka z litego złota. Ortho Flextech jest przeznaczony do utrzymywania pozycji zębów po leczeniu ortodontycznym poprzez stabilizację korekt ortodontycznych i zapobieganie nawrotom rotacyjnym. Charakteryzuje się łatwą aplikacją, która w naturalny sposób dopasowuje się do krzywizny łuku językowego. Dzięki zastosowaniu Ortho Flextech skraca się czas pracy na fotelu i poprawia komfort pacjenta.

Opakowanie: szpula 75cm

STOJAKI AKRYLOWE

Akrylowe stojaki wykonane są w wysokiej jakości akrylu.

Akrylowy stojak na łuki ortodontyczne z przykrywką 1001



Pojemność: 12 tub na łuki

Akrylowy organizer na ligatury ortodontyczne 1003



Pojemność: ok.18 opakowań ligatur

Akrylowy stojak na kleszcze z przykrywką 1002



Pojemność: ok.15 kleszczy plus 2–3 mniejsze pęsety

Akrylowy organizer na ligatury i łańcuszki ortodontyczne 1005



Pojemność: ok. 12 opakowań ligatur i 10–12 łańcuszków

Akrylowy organizer na łańcuszki ortodontyczne 1004



Pojemność: ok. 16–18 łańcuszków

MIKROIMPLANTY PERFECT TITANIUM



Wkrętak kątowy do uchwytu mikroimplantów ortodontycznych

510-4-2

Dużo większa wygoda przy wkręcaniu
podniebiennym



Pierścień mocy do uchwytu mikroimplantów ortodontycznych

510-4-4

Pierścień zamieszczony wokół uchwytu,
wspomaga użycie siły

Mini-uchwyt śrubokręt do mikroimplantów ortodontycznych

510-2

Mniejsza konstrukcja uchwytu umożliwia lepszy uchwyt
dla osób z mniejszymi dłońmi



Wiertło do wstępnego gwintowania do mikroimplantów ortodontycznych 1.1 x 19,9 mm

510-3-1



Wiertło do wstępnego gwintowania do mikroimplantów ortodontycznych 1.1 x 47 mm

510-3-2

Mini-wkrętak do uchwytu mikroimplantów ortodontycznych, bit 60 mm

510-3-3

Specjalna konstrukcja
chwytająca mikroimplanty



Uchwyt standard do mikroimplantów ortodontycznych

510-1

Przystosowany do różnych rodzajów
mikroimplantów. Jest niezbędny
do wkręcania i wykręcania śrub



Mini-wkrętak do uchwytu mikroimplantów ortodontycznych, bit 20 mm

510-4-1

Ze specjalną konstrukcją do chwymania mikroimplantów
Końcówka umożliwia pracę na kątnicy



Ręczne narzędzie podniebienne do mikroimplantów ortodontycznych

510-4-3

Końcówka ułatwia wprowadzanie mikroimplantów
w okolice podniebienia

Mikroimplanty ortodontyczne PT III

WYDŁUŻONA SZYJKA Zapewnia więcej miejsca do mocowania m.in. sprężynek i łańcuszków

OTWÓR W GŁOWICY SZEŚCIOKĄTNEJ
Służy do przewleknięcia dodatków ortodontycznych

GŁADKIE PRZEJŚCIE POD SZEŚCIOKĄTNĄ GŁOWICĄ Niweluje zaleganie pozostałości pokarmowych, tkankowych i reakcji zapalnych

CYLINDRYCZNY KSZTAŁT GWINTU
Ułatwia wkręcanie oraz wykręcanie śrub

GŁOWICA W KSZTAŁCIE ŁUKU I MNIEJSZA GŁOWICA SZEŚCIOKĄTNA Głowica bez szorstkiego kąta zmniejsza uczucia ciała obcego w jamie ustnej, dzięki wyprofilowanym kształtom można uniknąć ranienia tkanek miękkich

1.4x6 mm	510PT-14-6
1.4x8 mm	510PT-14-8
1.4x10 mm	510PT-14-10
1.6x8 mm	510PT-16-8
1.6x10 mm	510PT-16-10
1.6x12 mm	510PT-16-12
2.0x8 mm	510PT-20-8
2.0x10 mm	510PT-20-10
2.0x12 mm	510PT-20-12



Mikroimplanty ortodontyczne PT V

GŁOWICA W KSZTAŁCIE ŁUKU I MNIEJSZA GŁOWICA SZEŚCIOKĄTNA Głowica bez szorstkiego kąta zmniejsza uczucia ciała obcego w jamie ustnej, dzięki wyprofilowanym kształtom można uniknąć ranienia tkanek miękkich

GŁADKIE PRZEJŚCIE POD SZEŚCIOKĄTNĄ GŁOWICĄ Niweluje zaleganie pozostałości pokarmowych, tkankowych i reakcji zapalnych

CYLINDRYCZNY KSZTAŁT GWINTU Ułatwia wkręcanie oraz wykręcanie śrub

KONSTRUKCJA GWINTU SAMONAWIERCAJĄCEGO
Pozwala wkręcić śrubę bez użycia wiertła

OTWÓR POPRZECZNY NA GŁOWICY
Daje dodatkowe możliwości mocowania

WYDŁUŻONA SZYJKA Zapewnia więcej miejsca do mocowania m.in. sprężynek i łańcuszków

OTWÓR W GŁOWICY SZEŚCIOKĄTNEJ Służy do przewleknięcia dodatków ortodontycznych

KOLOROWE OZNACZENIA Ułatwiają rozróżnić rozmiary: fioletowy (1.4), złoty (1.6), niebieski (2.0)

1.4x6 mm	510PTV-14-6
1.4x8 mm	510PTV-14-8
1.4x10 mm	510PTV-14-10
1.6x8 mm	510PTV-16-8
1.6x10 mm	510PTV-16-10
1.6x12 mm	510PTV-16-12
2.0x8 mm	510PTV-20-8
2.0x10 mm	510PTV-20-10
2.0x12 mm	510PTV-20-12



NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE



Narzędzia ortodontyczne produkowane są z najwyższą precyzją i doskonałym wykończeniem, odporne na przebarwienia i korozję. Wszystkie powierzchnie tnące wykonane są z najwyższej jakości stali T-12, która za każdym razem zapewnia czyste, gładkie cięcia łuków. Każda para tych precyzyjnych narzędzi posiada trwałe łączenie śrubowe, które gwarantuje dokładność i wytrzymałość. Ergonomiczny design zapewnia niezawodny i pewny uchwyt oraz doskonałą równowagę. Narzędzia posiadają superostre, diamentowo ostrzone końcówki tnące. Kleszcze doskonale nadają się zarówno do sterylizacji chemicznej jak i termicznej.



Kleszcze ortodontyczne do cięcia cienkiego drutu 801-1

Zalecane do cięcia drutów ligaturowych oraz ligatur elastycznych mniejszych niż .015"



Kleszcze ortodontyczne do cięcia grubego drutu 801-2

Służą do cięcia grubego drutu, łuków Niti i stali nierdzewnej poniżej .03"



Kleszcze ortodontyczne do cięcia dystalnego 801-3

Dzięki specjalnym, zagiętym szczypcom w kształcie litery „U”, mogą dokładnie równolegle obciąć długie końcówki drutów. Zalecane do max. grubości .021" x .025"



Kleszcze ortodontyczne do gięcia cienkiego drutu 802-1

Zalecane są do zaginania oraz robienia pętli i sprężynek na cienkich łukach okrągłych mniejszych niż .023" lub prostokątnych mniejszych niż .022" x .028"



Kleszcze ortodontyczne do konturowania 802-3

Służą do nadawania odpowiedniego momentu obrotowego w wybranych częściach łuku krawężnego mniejszego niż .022" x .028"



Kleszcze ortodontyczne Tweed 802-4

Uniwersalne narzędzie do zaginania łuków, formowania pętli o różnej średnicy



Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania zamków 802-6

Pomagają sprawnie i bezpiecznie usunąć zamki ortodontyczne po leczeniu przy minimalnym dyskomforcie pacjenta



Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania pierścieni – przednie 802-7-1

Ułatwiają usuwanie pierścienia za pomocą długiego, smukłego dłuta z miękką, nakładaną końcówką



Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania pierścieni – tylne 802-7-2

Ułatwiają usuwanie pierścienia za pomocą długiego, smukłego dłuta z miękką, nakładaną końcówką




Kleszcze ortodontyczne Weingart 802-9

Wielofunkcyjny instrument z długimi, smukłymi, zakrzywionymi końcówkami.




Kleszcze ortodontyczne do zaciskania haczyków 802-12

Niezbędne narzędzie ze specjalnymi końcówkami do prostego zaciskania haczyka na łuku, idealne do trudno dostępnych miejsc

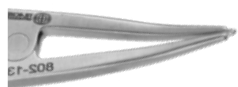

Kleszcze ortodontyczne do zakładania elastików 802-13

Dzięki ergonomicznym, wypukłym ramionom z systemem sprężynowym, w prosty sposób można założyć elastiki w trudno dostępne miejscach jamy ustnej

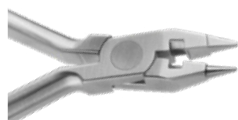


Kleszcze ortodontyczne multifunkcyjne 802-14

Niezbędne w każdym gabinecie kleszcze do cięcia i gięcia cienkich oraz grubych drutów



Kleszcze ortodontyczne Mathieu 802-15

Igłotrzymacz służący w ortodoncji do zakładania ligatur elastycznych, precyzyjnie wykonane ząbki oraz trzystopniowa blokada poprawiają komfort pracy

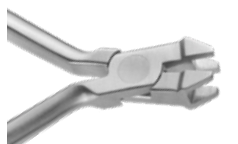

Kleszcze ortodontyczne do nadawania torqu 802-19-2

Dwuelementowe kleszcze (narzędzie + kluczyk) ułatwiające nadanie odpowiedniego torqu na łuku ortodontycznym .018x.025, .019x.025



Kleszcze ortodontyczne do tylnych zagięć na łukach niklowo-tytanowych 802-20

Narzędzie zostało zaprojektowane do łatwego formowania zagięć stopniowych 1 mm. Mogą one być formowane w górę lub w dół, prawą lub lewą stronę



Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania aparatów klejonych 802-22

Zaprojektowane do łatwego odklejania aparatów takich jak Hass i Hyrax przy minimalnym dyskomforcie pacjenta. Narzędzie dopasowuje się do płaszczyzny zęba



Pozycjoner do zamków z ruchomą główką 803-1

Pozycjoner do zamków dla czterech wysokości: 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm i 5.0 mm. Ruchoma, regulowana nawet pod kątem 45 stopni główka ułatwia pozycjonowanie zamków w slocie .018" oraz .022"



Pozycjoner do zamków 803-1-22

Pozycjoner do zamków dla czterech wysokości: 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm i 6.0 mm

Slot .022"



Pęseta do zamków długa 803-2L

Pęseta samozaciskowa do zakładania zamków z pozycjonerem. Zacisk pozwala na pewny, stabilny uchwyt zamka a pozycjoner na końcu pęsety na sprawne ułożenie a następnie naklejenie zamka na zębie.



Pęseta do rurek 803-3R 1

Pęseta służy do zakładania rurek ortodontycznych. Narzędzie posiada wyprofilowane, cienkie końcówki, pozwalające umieścić rurkę w odpowiednim miejscu na zębie.



Narzędzie ortodontyczne do zamków samoligaturujących Prestige 803-3

Wykonanie precyzyjnie narzędzie usprawnia szybkie otwieranie i zamykanie zamków samoligaturujących



Narzędzie do dociskania pierścieni 803-4

Lekki, plastikowy nagryzacz do dociskania pierścieni z trójkątnym, ząbkowanym metalowym trzpieniem usprawnia nałożenie pierścienia na ząb



Kleszcze ortodontyczne Mosquito 803-6

Uniwersalne kleszcze zaciskowe do chwytania drobnych elementów, usprawniające pracę



Lusterko stomatologiczne rodowane, przednio-powierzchniowe 24 mm 803-9



Dwustronne widełki do ligatur 1/4' 803-7

SPOIWA RELIANCE

Cement Ultra Band Lok
światłoutwardzalny w strzykawce
5 g UBLPP



Lider w branży klejów do pierścieni:

- System pojedynczej pasty
- Utwardzalny poprzez światło niebieskie
- Wysokie uwalnianie fluorków
- Idealnie wiąże się z metalem
- Ultra Band Lok łączy się chemicznie z pierścieniami metalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.
- Klej uniwersalny
- Klej może również być używany do łączenia akrylowych materiałów oraz do odbudowy okluzji.

Zastosowanie:

- Klejenie opierścieni
- Budowanie okluzji
- Aparaty akrylowe: Hyrax, MARA, RPE, itp.
- Idealny do blokady laboratoryjnej
- Ultra Band Lok jest w kolorze białym

Wskazania do zastosowania: Ultra Band-Lok jest przeznaczony do stosowania jako cement ortodontyczny do pierścieni i odbudowy okluzyjnej.

Klej Light Cure Retainer
światłoutwardzalny do retainerów,
okuzji, flow w strzykawce 5 g LCR



L.C.R.[™] jest płynnym, światłoutwardzalnym klejem ortodontycznym przeznaczonym do stosowania w gabinetach ortodontycznych, stomatologicznych w celu klejenia retainerów, tworzenia okluzji i retencji nakładek termoplastycznych.

Korzyści:

- Klej w strzykawce ciśnieniowej 5g
- Nanowypełniacz Micro+ zapewniający płynną konsystencję i trwałość kompozytu o wysokim stopniu wypełnienia
- Utwardza się do szklistej powierzchni
- Opracowany do zastosowań BLR

Wskazania do zastosowania: L.C.R. jest płynnym, światłoutwardzalnym klejem ortodontycznym przeznaczonym do stosowania w gabinetach ortodontycznych oraz stomatologicznych w celu klejenia retainerów językowych, tworzenia odbudów okluzyjnych i retencji nakładek termoplastycznych.

Wiertło do usuwania kleju 1 szt. #118L na turbinę RSBL



System wykończeniowy Renew® Finishing System jest przeznaczony do usuwania pasty kompozytowej i polerowania powierzchni szkliwa, porcelany, metalu lub kompozytu.

Specyfikacja:

- 18-nasto karbowy węglik zapiekany
- Szybkie usuwanie nadmiaru dużej ilości kompozytu
- Poleruje powierzchnię zęba
- Stosować z lub bez wody
- Montaż na turbinę

Wiertła do polerowania 12 szt. na kątnicę #383 RSPL



Stożkowane wiertła wykończeniowe systemu Renew® Finishing System Points służą do usuwania cienkich warstw kompozytu i polerowania szkliwa i sztucznych substratów.

Zastosowanie:

- Usuwa resztki kompozytu
- Poleruje powierzchnię zęba
- Nie wytwarza ciepła
- Pakowane po 12 szt.
- Montaż na kątnicę

Pasta (Pumeks) 1st&Final do polerowania szkliwa 200 szt. FF



Ortodontyczny pasta (pumeks) profilaktyczny do czyszczenia i polerowania powierzchni zębów przed zastosowaniem wytrawiacza kwasowego.

Informacje o produkcie:

- Wstępnie zmieszany i zapakowany w pojedyncze kapsułki profilaktyczny pumeks ortodontyczny
- Bezsmakowy, nie zawiera fluorków, tłuszczów ani związków chemicznych, które mogłyby pozostawić powłokę hamującą lub osłabiającą wiązanie
- Pumeks profilaktyczny 1st & Final może być stosowany przed związaniem w celu osiągnięcia dokładnej profilaktyki lub po zdjęciu aparatu w celu uzyskania czystej, świeżej powierzchni

Opakowanie: 200 szt.

Materiał ochronny Pro Seal do szkliwa światłoutwardzalny Butelka 6 ml PRO



Zastosowanie:

- Rutynowa ochrona szkliwa
- Pacjenci wymagający higieny
- Łagodzi odwapnienie
- Może być stosowany jako podkład przed zamocowaniem aparatu

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: PRO SEAL jest przeznaczony do stosowania jako szczeliwa do powierzchni szkliwa wokół zamków ortodontycznych.

Podkład wiążący Assure Plus

Butelka 6 ml PLUS



Najbardziej wszechstronny podkład, jaki kiedykolwiek stworzono!

- Zwiększa siłę wiązania na wszystkich powierzchniach
- Przygotowuje każdą powierzchnię zęba do klejenia
- Skuteczna na każdym rodzaju szkliva
- Skuteczna na każdym sztucznym podłożu
- Eliminuje kwas fluorowodorowy w przypadku koron porcelanowych
- Normalne lub nietypowe szklivo
- Dentyne lub cement

Żywica wiążąca do każdej powierzchni Assure® Plus służy do zwiększania przyczepności do szkliva normalnego, nietypowego (suchego lub mokrego), uzupełnień amalgaumatowych, złotych, ze stali nierdzewnej, a także do porcelany, cyrkonu, uzupełnień kompozytowych oraz akrylowych zębów tymczasowych lub w moście.

Pasta kompozytowa T.K.O. do okluzji, flow, naprawy aparatów w strzykawce 3,4 g TKOP



TKO to różowy, płynny światłoutwardzalny żel kompozytowy do płaszczyzn nagryzowych, naprawy aparatów akrylowych, budowania okluzji oraz jako flow do mini moldów.

Klej światłoutwardzalny Light Bond



Klej Light Bond to wysoce wypełniony materiał, który wytwarza niezwykle silne wiązanie we wszystkich sytuacjach orto[1]-dontycznych, ze wszystkimi rodzajami zamków ortodontycznych. Całkowita polimeryzacja kleistej, gładkiej, lepkiej pasty pod wszystkimi rodzajami baz zamków. Klej Light Bond składa się z katalizatora i wypełniacza, który odbija światło dla zapewnienia pełnej polimeryzacji pod każdym aparatem: metalowym, ceramicznym, szafirowym lub kompozytowym. Po prawidłowym utwardzeniu materiału natychmiast można zakładać łuki ortodontyczne. Klej to materiał wypełniony drobnymi cząsteczkami szkła zaprojektowany specjalnie do zastosowań ortodontycznych, który zapewnia maksymalne dotarcie wypełniacza do najdrobniejszej siateczki podstawy zamka oraz usunięcie nadmiaru spoiwa bez uszkodzenia szkliva.

Zestaw zawiera: 20 gram pasty, 2x 3cc żywicy, 23 gram wytrawiacza, szpatułki, podkładki do mieszania oraz pędzelki.

Klej światłoutwardzalny GoTo w strzykawce 4 g GTP



GoTo® to światłoutwardzalny klej jednoskładnikowy z bondem o doskonałych właściwościach użytkowych. Nie powoduje „efektu pływania” zamków po umieszczeniu ich na zębach. Dla uzyskania najlepszych efektów klejenia rekomendujemy zastosowanie podkładu Assure Plus

- Unikalna lepkość z łatwością penetruje podstawę zamków
- Brak dryftu zamka - pozostaje na miejscu aż do utwardzenia
- Nowa, opatentowana konstrukcja mikrowypełniacza
- Przezroczyste wykończenie pasuje do każdego odcienia zębów
- Maksymalna siła wiązania i sprawdzona konsystencja
- Łatwe usuwanie i czyszczenie

Zastosowania kliniczne:

- Klejenie zamków i rurek
- Klejenie stałych retainerów językowych
- Wiąże wszystkie metalowe, ceramiczne i kompozytowe mocowania
- Środek ujawniający UV – fluoryzuje na zębie

Klej Excel w słoiczku lub w strzykawce EHJF, EHSF



Klej Excel: To wysoce wydajne spoiwo, które zapewnia niezwykle silne wiązanie przy użyciu niewielkiej ilości. Klej zawiera fluor, który jest uwalniany przez cały czas podczas noszenia aparatu. Klejenie pośrednie, klejenie akrylowych aparatów oraz aparatów RPE wymaga dodatkowego czasu pracy. Dwuskładnikowy klej Excel Regular zapewnia wystarczający czas (3 minuty) na zmieszanie materiału, nałożenie na aparat, umieszczenia aparatu w ustach pacjenta i usunięcia nadmiaru zbędnego spoiwa. Spoiwo zawiera uzdatniacz do plastiku do chemicznego łączenia wszystkich powierzchni akrylowych.

Zestaw zawiera: 12 gram pasty A, 12 gram pasty B, 7 gram żywicy A, 7 gram żywicy B, 10cc uzdatniacza do plastiku, szpatułki, podkładki do mieszania oraz pędzelki.

Excel Pasta A i Pasta B: w słoiczku lub strzykawce ERJAF, ERJB, 1ERSB, 1ERSAF



Dostępne są w dwóch wersjach: słoiczki (po 12 gram) oraz strzykawki (1 strzykawka 6 gram sprzedawane po 2 szt.), uzdatniacz do plastiku.

Klej chemoutwardzalny Rely-A-Bond RPF



Klej ten został opracowany z monomerem zawierającym fluor, który nie wpływa na siłę wiązania. Klej składa się z wysoce wypełnionej pasty która w połączeniu z unikalnym primerem, wytwarza niezwykle silne wiązanie z wytrawioną powierzchnią szkliva, które praktycznie eliminuje błędy klejenia. Pasta Rely-a-Bond jest niezwykle lepka, co zapobiega „pływaniu” zamków. Zapewnia dotarcie nawet do najdrobniejszej siateczki podstawy zamka. Klej posiada unikalny system katalizujący, który nie wymaga przetrzymywania spoiwa w chłodziarce. Ze względu na swoją niezwykle wydajność, niewielka ilość pasty i primera jest wystarczająca do osiągnięcia maksymalnej siły klejenia. Wydajność: przybliżeniu aż 850 klejeń.

Zestaw zawiera: 14 gram pasty, 16 gram primera, 9 gram wytrawiacza, szpatułki, podkładki do mieszania oraz pędzelki.

Excel uzdatniacz do plastiku PL



Reliance Plastic Appliance Conditioner jest przeznaczony do stosowania jako uzdatniacz m.in. do zamków estetycznych, aparatów akrylowych oraz uzupełnień kompozytowych.

KONTAKT

Region	Nr telefonu
Zachodniopomorskie	tel: 885 225 513
Pomorskie	tel: 887 222 209
Warmińsko-mazurskie	tel: 605 464 596
Podlaskie	tel: 605 464 596
Mazowieckie Północne	tel: 606 465 036
Mazowieckie Południowe	tel: 604 276 801
Kujawsko-pomorskie	tel: 605 464 596
Wielkopolskie	tel: 605 464 596
Lubuskie	tel: 885 225 513
Dolnośląskie	tel: 607 442 262
Opolskie	tel: 607 442 262
Łódzkie	tel: 726 650 750
Świętokrzyskie	tel: 726 650 750
Lubelskie	tel: 693 244 663
Podkarpackie	tel: 693 244 663
Małopolskie	tel: 726 750 760
Śląskie	tel: 726 555 574



ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa

tel: 601 494 169

tel: 605 464 596

www.trachem.pl