

PT III

WYDŁUŻONA SZYJKA

Zapewnia więcej miejsca do mocowania m.in. sprężynek i łańcuszków

OTWÓR W GŁOWICY SZEŚCIOKĄTNEJ

Służy do przewleknięcia dodatków ortodontycznych

CYLINDRYCZNY KSZTAŁT GWINTU

Ułatwia wkręcanie oraz wykręcanie śrub

ZALETY

WZMOCNIONY KORPUS

Zapewnia większą wytrzymałość i stabilność wkręcania

KONSTRUKCJA MINI ŚRUBY STOŻKOWEJ

Rozkłada naprężenia kostne

GŁOWICA W KSZTAŁCIE ŁUKU I MNIEJSZA GŁOWICA SZEŚCIOKĄTNA

Głowica bez szorstkiego kąta zmniejsza uczucie ciała obcego w jamie ustnej, dzięki wyprofilowanym kształtom można uniknąć ranienia tkanek miękkich

GŁADKIE PRZEJŚCIE POD SZEŚCIOKĄTNĄ GŁOWICĄ

Niweluje zaleganie pozostałości pokarmowych, tkankowych i reakcji zapalnych

WYSOKA WYDAJNOŚĆ STABILNOŚCI

Wytrzymuje siły boczne i oferuje lepszą przestrzeń na osteointegrację

WYSOKA PRZYPĘCNOŚĆ DO TKANEK MIĘKKICH

Bezpieczne zastosowanie mikroimplantów

PT V

GŁOWICA W KSZTAŁCIE ŁUKU I MNIEJSZA GŁOWICA SZEŚCIOKĄTNA

Głowica bez szorstkiego kąta zmniejsza uczucie ciała obcego w jamie ustnej, dzięki wyprofilowanym kształtom można uniknąć ranienia tkanek miękkich

OTWÓR W GŁOWICY SZEŚCIOKĄTNEJ

Służy do przewleknięcia dodatków ortodontycznych

CYLINDRYCZNY KSZTAŁT GWINTU

Ułatwia wkręcanie oraz wykręcanie śrub

KONSTRUKCJA GWINTU SAMONAWIERCAJĄCEGO

Pozwala wkręcić śrubę bez użycia wiertła

OTWÓR POPRZECZNY NA GŁOWICY

Daje dodatkowe możliwości mocowania

WYDŁUŻONA SZYJKA






Zapewnia więcej miejsca do mocowania m.in. sprężynek i łańcuszków

GŁADKIE PRZEJŚCIE POD SZEŚCIOKĄTNĄ GŁOWICĄ

Niweluje zaleganie pozostałości pokarmowych, tkankowych i reakcji zapalnych

KOLOROWE OZNACZENIA

Ułatwiają rozróżnić rozmiary (średnice): fioletowy (1.4), żółty (1.6), niebieski (2.0)

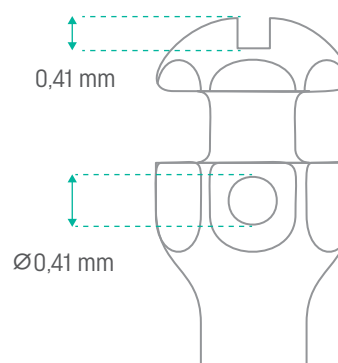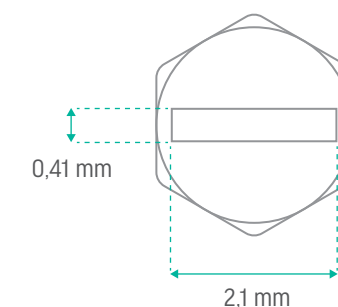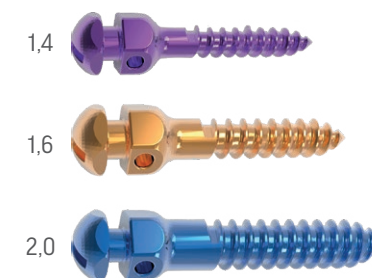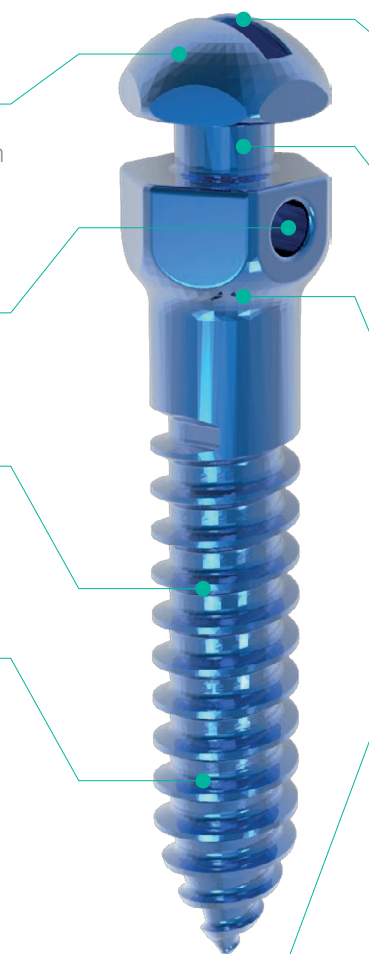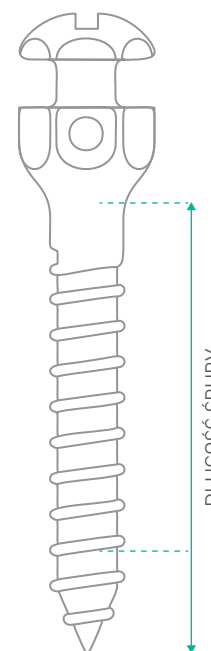

WKRETAK KĄTOWY DO
UCHWYTU MIKROIMPLANTÓW
ORTODONTYCZNYCH
510-4-2

Dużo większa wygoda przy wkręcaniu
podniebiennym



PIERŚCIEŃ MOCY DO
UCHWYTU MIKROIMPANTÓW
ORTODONTYCZNYCH
510-4-4

Pierścień zamieszczony wokół
uchwytu, wspomaga użycie siły



MINI-WKRETAK DO UCHWYTU
MIKROIMPLANTÓW
ORTODONTYCZNYCH, BIT 60 MM
510-3-3

Specjalna konstrukcja chwytająca
mikroimplanty




UCHWYT STANDARD DO
MIKROIMPLANTÓW
ORTODONTYCZNYCH
510-1

Przystosowany do różnych rodzajów
mikroimplantów. Jest niezbędny do
wkręcania i wykręcania śrub



MINI-UCHWYT ŚRUBOKRĘT DO
MIKROIMPLANTÓW
ORTODONTYCZNYCH
510-2

Mniejsza konstrukcja uchwytu
umożliwia lepszy uchwyt dla osób
z mniejszymi dłońmi

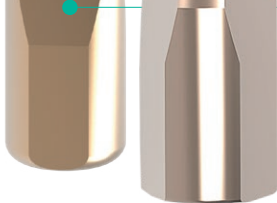

MIKROIMPLANTY ORTODONTYCZNE – PT III

1.4x6 mm	510PT-14-6
1.4x8 mm	510PT-14-8
1.4x10 mm	510PT-14-10
1.6x8 mm	510PT-16-8
1.6x10 mm	510PT-16-10
1.6x12 mm	510PT-16-12
2.0x8 mm	510PT-20-8
2.0x10 mm	510PT-20-10
2.0x12 mm	510PT-20-12



MIKROIMPLANTY ORTODONTYCZNE – PT V

1.4x6 mm	510PTV-14-6
1.4x8 mm	510PTV-14-8
1.4x10 mm	510PTV-14-10
1.6x8 mm	510PTV-16-8
1.6x10 mm	510PTV-16-10
1.6x12 mm	510PTV-16-12
2.0x8 mm	510PTV-20-8
2.0x10 mm	510PTV-20-10
2.0x12 mm	510PTV-20-12



MIKROIMPLANTY ORTODONTYCZNE

Mikroimplanty Ortodontyczne

1. Skracają okres leczenia ortodontycznego (nawet o 30%!)
2. Pozwalają skorygować mniejsze wady zgryzu bez wymogu założenia pełnego stałego aparatu ortodontycznego
3. Pomagają wyleczyć skomplikowane wady, które wcześniej wymagały terapii chirurgiczno-ortodontycznej
4. Są alternatywą do stosowania m.in. maski twarzowej oraz headgear
5. Nie powodują uszkodzeń kości
6. Są proste do wkręcenia
7. Tytan z którego są zrobione jest nieszkodliwy dla organizmu i nieuczulający pacjenta
8. Możliwość osadzenia ich nawet w podniebieniu
9. Są komfortowe dla pacjenta
10. Według badań klinicznych skuteczność mikroimplantów sięga od 70 do 90%.

Kiedy mikroimplanty są najczęściej stosowane

1. Duże braki zębowe
2. Konieczność wyprostowania korzeni zębów nachylonych wzdłuż łuku
3. Ściąganie zębów zatrzymanych do łuków zębowych
4. W przypadku intruzji zębów
5. Zamknięcie łuków po usunięciu zębów spowodowanym wskazaniami Lekarza Ortodonta

DODATKOWE ELEMENTY



RĘCZNE NARZĘDZIE PODNIEBIENNE,
KONCÓWKA 510-4-3

Ułatwia wprowadzanie
mikroimplantów w okolice podniebienia



WIERTŁO DO WSTĘPNEGO
GWINTOWANIA 1.1 X 47 MM
510-3-2



MINI-WKRETAK DO UCHWYTU, BIT 20
MM 510-4-1

Ze specjalną konstrukcją do
chwytania mikroimplantów



WIERTŁO DO WSTĘPNEGO
GWINTOWANIA 1.1 X 19,9 MM
510-3-1